



Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE



Introduktion

Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite.

SmartVision är den första Android smartphone speciellt utformad för personer med nedsatt syn. SmartVision kombinerar en fysisk knappsats, ett röstgränssnitt och en pekskärm, vilket gör den till en fullt tillgänglig enhet.

SmartVision är den senaste generationen smartphone som ger dig ett gränssnitt och funktioner som är lätta att navigera i för dagligt bruk. Dess Applikationer organiseras i favoriter, den har sitt användargränssnitt förenklat med en stor display (stora ikoner, 4 teckenstorlekar), röstkommando, tal-till-text (dikteringsläge för att skriva meddelande), röst över beskrivning av vad som finns på din skärm, Kapten GPS ⁽¹⁾ med röststyrning, ett förstoringsglas med kontrastfilterpaneler, NFC-taggar ⁽¹⁾ webbaserad hjälp, teckenigenkänning ⁽¹⁾ etc... allt det finns där!

SmartVision ger dig det bästa av smartphones, enkel att använda och med unik tillgänglighet.

Den här användarhandboken har utvecklats för att hjälpa dig att lära dig steg för steg, med hjälp av bildskärmskopior, hur man använder de olika grundläggande funktionerna i något av de tre driftlägena som du har valt.

Den är ett komplement till Snabbguiden, och hjälper dig att få ut det mesta med din SmartVision.

Hur man använder detta material

Den här användarhandboken beskriver SmartVision med de viktigaste funktionerna och driftlägena. Funktioner beskrivs generiskt utan hänvisning till de mer specifika kraven i avancerade tillgänglighetsläge (standardläget) som helt beskrivs i avsnittet "**Tillgänglighetsläge**".

⁽¹⁾ : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

Innehållet i lådan

SmartVision av KAPSYS innehåller:

- Ett batteri
- En 220/110V - 5V USB laddare
- En dockningsstation för laddning ⁽¹⁾
- En USB/micro USB-kabel
- En snodd
- Två stereohörlurar med mikrofon och en push-to-talk-knapp.
- Ett skyddsfodral ⁽¹⁾

Denna förteckning över tillbehör kan variera beroende på land, enhetskonfiguration eller modellversion.

⁽¹⁾ : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

Introduktion Smartvision

Framsidan



Med tangentbordet på den nedre delen av frontpanelen kan du ringa ett telefonnummer eller skriva tecken för textmeddelanden i multi-tap-läge.

4 kontrollknappar sitter ovanför knappsatsen:

- **"OK"** För att plocka upp ett samtal, eller bekräfta.
- De två piltangenterna **"▲▼"** Gör det möjligt att bläddra upp eller bläddra ned i en meny eller en aktuell sida.
- **"C"** För att avsluta ett samtal eller ta bort en post.

Ovanför dessa 4 kontrollknappar, det finns 3 lätt igenkännbara Android infällda knappar:

- **"Meny"**  till vänster: tryck för att komma åt det pågående **"Meny"**.
- **"Home"**  i mitten: tryck för att gå tillbaka till **"Hemskärm"** när som helst.
- **"Tillbaka"**  till höger: tryck för att gå **"Tillbaka"** Till föregående skärm.

Ovansidan:



"På Av" och skärm-av läget  knappen är placerad längst upp på höger sida av telefonen. Tryck och håll denna knapp för att starta eller stoppa din SmartVision. En kort knapptryckning kommer att sätta telefonen i standby-läge och en ytterligare kort tryck kommer att återaktivera det. På mitten finns ett jack för snodden. Sedan finns ett ljud 3.5-uttaget på vänster sida av **"På Av"**-knappen som ansluter till hörlurarna som medföljer enheten.

Höger sida:



Röstnavigationsknappen sitter på den högra sidan av din SmartVision. Tryck kort på den här knappen för att skicka ett röstkommando och tryck och håll om du vill skriva ett meddelande genom diktat.

Mini-USB-port på toppen av mobiltelefonen är för anslutning till en dator eller till en nätladdare med kabeln som medföljer i förpackningen.

Botten:



Anslutningsplintar på botten av handenheten används för att ansluta till en dockningsstation för att ladda batteriet, här finns också en mikrofon.

Vänster sida:



De två knapparna som sitter på vänster sida av telefonen används för att öka (volym upp) eller minska (volym ned) ljudvolymen.

Bak:



Den orangea Larmknappen sitter på baksidan uppe till vänster. Tryck ned den här knappen för att starta i en nödsituation. Till höger om denna SOS-knapp finns kameralinsen och en port för förstärkt lyssning.

Installation

Sätta i SIM-kortet


SIM-kortet är utfärdat av en telefontjänstleverantör.

Vänligen notera: Endast Mini-SIM (2-FF) kort stöds av SmartVision. Om du har ett annat SIM-kort, vänd dig till din teleoperatör för att ersätta den med en Mini SIM. Det rekommenderas att ändra formatet på SIM-kortet i stället för att använda en adapter.



Sätta i SIM-kortet:

1. Vänd enheten upp och ner, leta efter spår längst ner till vänster, och lyft av bakstycket.
2. Installera SIM-kortet, med chipet nedåt och avsmalnande vinkel ned till höger. Skjut SIM-kortet uppåt för att passa in den i facket.

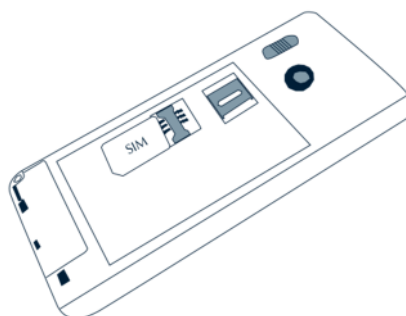


Vänligen notera: Micro-SD-minneskortsläsare ligger precis ovanför SIM-korthållaren. Beroende på konfigurationen av din produkt, kan Micro-SD redan vara installerade i produkten.

Batteriet

Sätt i batteriet:

1. Sätt först i botten av batteriet i spåren.

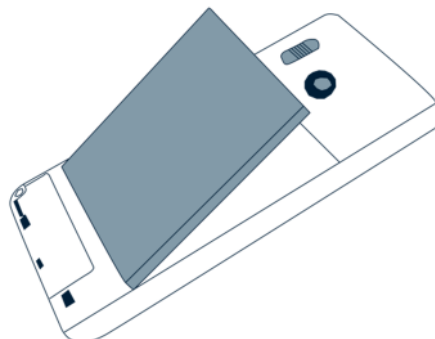

2. Snäpp fast batteriet på plats.
3. Sätt tillbaka bakpanelen som passar den övre delen först.



4. Knäpp fast och stäng enheten.


Ladda batteriet

Batteriet du köpt med din SmartVision är inte fulladdat. Innan du använder apparaten, rekommenderar vi att du laddar batteriet i minst 4 timmar.


Du kan därefter ladda det vid behov och beroende på din användning och den tillgängliga laddningen av batteriet.

Du kan kontrollera  ikonerna i övre högra hörnet när som helst för att veta hur mycket laddning som finns i batteriet. Du kan också trycka kort på Röstinmatningstangenten och tydligt säga sökordet "**Batterinivå**".

För att ladda batteriet, anslut USB-kabeln (medföljer i förpackningen) i väggsladdaren.

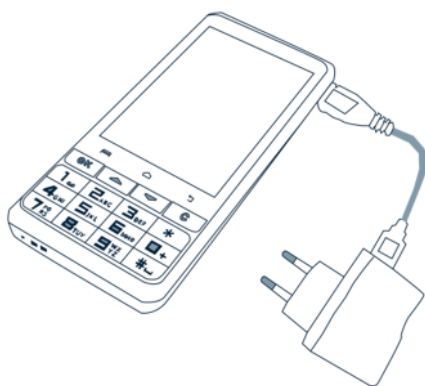

Du kan också ladda din SmartVision med hjälp av dockningsladdning.

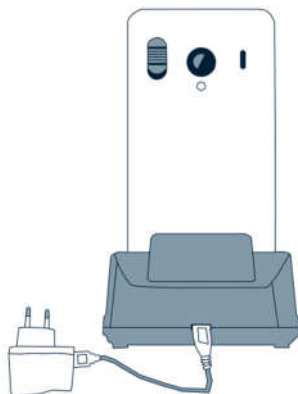

Observera ⁽¹⁾ skyddshöljet ska tas bort när du använder dockningsstationen. Om du inte vill ta bort skyddsfodral för att ladda enheten kan du använda USB-porten som sitter på höger sida av enheten.


⁽¹⁾ : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

Slå din SmartVision På och Av

Tryck och håll "**På Av**"  knappen (ovanpå enheten) för att starta din SmartVision. Släpp knappen så snart enheten vibrerar.

Vänligen notera: Om enheten inte startar, kontrollera om batteriet har installerats korrekt, om inte, upprepa installationen.

Tryck och håll "**På Av**"  knappen för att stänga av SmartVision.

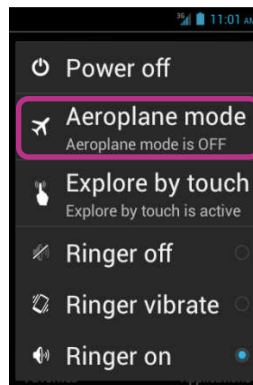

En skärm som kallas "**Huvudmeny**" visas. Klicka på "**Stäng av**" och bekräfta. Du kommer att känna en lätt vibration när enheten slocknar.

Vänligen notera: Skärmen "**Huvudmeny**" ger också genvägar till andra direkta alternativ: Flygplansläge, utforska genom beröring, skärm-av läge och konfiguration av ringsignalen Om du vill veta mer om de olika lägena finns i kapitlet "Inställningar" och "Tillgänglighetsläge".

Vänligen notera: "**Skärm-av**" Läget är endast tillgängligt när "**utforska genom beröring**" är aktiverat. I det här läget kan du släcka skärmen på SmartVision under användning för att spara på batteriet och skydda dina privata data.

Skärm avstängt läge

När SmartVision är på kommer en kort knapptryckning på "**På Av**"  knappen att föra den i standby-läge (skärm av), eller tillbaka till driftläge (skärm på).

I standby-läge är SmartVision's skärm avstängd men dess funktioner aktiverade. Du kan fortfarande ta emot inkommande samtal, meddelanden, e-post och navigationsanvisningar.

Vänligen notera: som en standardinställning, växlar telefonen automatiskt att skärm av läge efter två minuters inaktivitet för att spara på batteriet.

Låsa PIN-koden på SIM-kortet

SIM-kortet har en identifikationskod med 4 siffror som kallas PIN-kod. PIN hjälper dig låsa SIM-kort för att undvika bedräglig användning av din SmartVision.

För att låsa upp SIM-kortet och få tillgång till de olika funktionerna i din SmartVision, ange PIN-koden med hjälp av knappsatsen bekräfta sedan med "OK".

Om du klickar på "Avbryt" Från den här skärmen, har du fortfarande tillgång till alla funktioner i enheten men inga kommunikationsfunktioner från din teleleverantör finns.

Vänligen notera: av sekretessskäl, hämta din PIN-kod med hjälp av text-till-tal är endast möjligt genom hörlurar.

Knappsats, pekskärm och Röststyrning

De finns tre gränssnitt eller driftlägen på SmartVision:

- **Knappsatsens** driftläge är för dem som vet hur man enkelt hanterar tangenter och knapparna på en mobiltelefon. För att bli bekant med SmartVision knappsats, se avsnittet där funktioner som är specifika för varje tangent och knapp beskrivs i detalj. (Se sidan 5).

Vänligen notera: avancerat tillgänglighetsläge (som är standard på din SmartVision) stöder ytterligare genvägar för enkel navigering genom skärmar och interaktion med din smartphone, de beskrivs i avsnittet "**Tillgänglighetsläge**".

- **Pekskärmsläge** är smartphone typiska driftläge. Det gör att du kan navigera genom de olika menyerna med fingertoppen. För att välja ett alternativ eller bekräfta en åtgärd trycker du helt enkelt relevant objekt på skärmen.

Vänligen notera: avancerat tillgänglighetsläge (som är standard på din SmartVision) innehåller ytterligare gestkommandon som möjliggör navigering mellan skärmar och interaktion med din smartphone. Dessa kommandon beskrivs i "**Tillgänglighetsläge**" nedan.

- **Röststyrning** ökar användningen av apparaten genom att frigöra användaren från knappsatsens hantering om det är en fysisk eller virtuell knappsats. Röststyrningsfunktionen aktiveras genom att trycka på röstknappen som sitter på höger sida av enheten.

Beroende på ditt val, vänligen läs förklaringarna och rekommendationerna nedan för enkel hantering av varje gränssnitt.

Knappsats

Din SmartVision omfattar fyra kontrollknappar placerade horisontellt på toppen av knappsatsen. De är, från vänster till höger:

- **"OK"** knappen: bekräfta ett alternativ, ett val eller ta emot ett inkommande samtal.
I vissa fall, när du trycker på den här knappen visas en snabbmeny med ytterligare alternativ för det markerade objektet (en kontakt, en applikation, ett meddelande, etc.).
- **"▲▼"** Upp och ner piltangenterna: för att bläddra upp och ned de olika objekt som visas på skärmen.
- **"C"**-knappen: För att radera ett tecken eller siffra, avvisa eller avsluta ett samtal.

Den alfanumeriska knappsatsen sitter under dessa styrknappar, presenteras i tre rader med sifferknapparna organiserade från vänster till höger på följande sätt:

- Första raden: 1, 2, 3, stjärna.
- Andra raden: 4, 5, 6, 0.
- Tredje raden: 7, 8, 9, # (fyrkant).

Den alfanumeriska knappsatsen (knapp 1 till #) används för att mata in text eller tecken beroende på inmatningsfältet.

Varje knapp ger tillgång till flera tecken: sifferknapp "2"  ger tillgång till a, b, c, 2, A (stort), B (stort), C (stort).

För att välja rätt tecken trycker du upprepade gånger på relevant sifferknapp för att komma åt de olika tecknen i samband med den här knappen.

Sifferknapp "1"  används för att infoga skiljetecken och fyrkant "Fyrkant"  används för att infoga ett blanksteg.

Knappen "**stjärna**"  används för att växla ett tecken till stora eller små bokstäver

Pekskärm

Som standard är SmartVision i läget "**Upptäck genom beröring**". Denna funktion har effekten att modifiera beteendet på pekskärmen för att passa personer med synskada. Resten av det här avsnittet beskrivs hur du använder standard pekskärm när den funktionen är inaktiverad. Om du vill veta mer om denna funktion (hur du aktiverar/inaktivera det) hänvisas till avsnittet "**Tillgänglighetsläge**".

Standard pekskärm läge

Pekskärmen hjälper dig att navigera genom skärmarna med fingertoppen. Peka på skärmen med din fingerspets för att välja ett alternativ, tryck på tangentfönstret för att visa det virtuella tangentbordet, skriv på det för att skriva ett meddelande, eller dra ditt finger upp och ner för att rulla displayen.

Välja eller aktivera ett objekt på skärmen:


Gör en kort tangenttryckning eller klicka på ett objekt för att välja det, bekräfta en åtgärd eller visa det virtuella tangentbordet i det medföljande inmatningsfältet.

Gör en lång knapptryckning för att få fler alternativ för det valda alternativet (snabbmenyn).




Rulla en lista:

Rulla upp och ner en lista som visas genom att föra fingret uppåt och nedåt utan att ta bort fingret på skärmen.

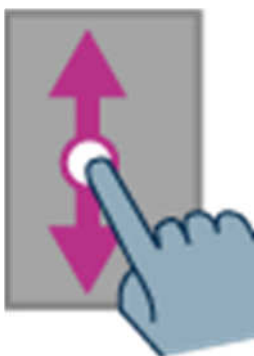

Zooma in/ut (tillgänglig på specifika Applikationer såsom bildvisare, e-post, etc.):

Använd två fingrar för att peka på skärmen, nyp inåt för att zooma ut, och nyp utåt för att zooma in.

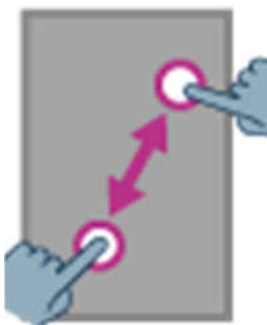

Tillgänglighetsläge

I det här avsnittet beskrivs specifika kommandon och gester samt knappsatsens kortkommandon för att hjälpa dig att kontrollera och interagera med din SmartVision när tillgänglighetsläget är aktiverat (standardinställning).

På startskärmen, klicka på **"Inställningar"** för att aktivera eller inaktivera tillgänglighetsläget, och klicka sedan på **"Tillgänglighet"** och markera eller avmarkera alternativet **"Upptäck genom beröring"** i listan.

Knappsats styrning:

SmartVision ger snabb tillgång till vissa funktioner genom att hålla fyrkant **"Fyrkant"**  längst ned till höger på den fysiska knappsatsen och trycka på en annan tangent av det fysiska tangentbordet. Ett pip kommer att signalera övergången till "knappsats styrsättet". Om ingen annan knapp trycks in direkt efter kommer ett annat pip ljuda

Om du trycker på **"Fyrkant"**  kontrollknappen med en annan tangent, kommer enheten att utföra följande kommandon:

- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangenten och tryck på **"1"**: Informera dig om din smartphone status (tid, batterinivå, nätverkets aktuella status, Wi-Fi-status, GPS-status, Bluetooth-status, NFC Status, ringläge och larmstatus).
- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangenten och tryck på **"2"** så kan du läsa innehållet i den aktuella skärmen.
- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangent och tryck sedan på **"3"** Visar smartphone statusfältet.
- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangent och tryck sedan på **"4"** Ökar hastigheten på tal.
- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangent och tryck sedan på **"5"** Minskar hastigheten på tal.
- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangent och tryck sedan på **"▲"** Upp-knappen: flyttar till vänster, till exempel när du surfar via de olika kategorierna i **"Musik"** applikationen.
- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangent och tryck sedan på **"▼"** ned knapp: flyttar till höger.
- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangent och tryck sedan på **"volym upp"**-knappen: Ökar volymen för ringsignalen.
- Tryck och håll **"Fyrkant"**  tangent och tryck sedan på **"volym ned"**-knappen: Minskar volymen för ringsignalen.

Redigeringsläget:

SmartVision möjliggör ett snabbt och enkelt redigeringsläge. I detta läge kan du navigera i ett inmatningsområde för att modifiera eller infoga ett tecken eller ett ord. Om du vill redigera ett inmatningsområde genom att trycka kontinuerligt stjärna "*" - knappen och samtidigt trycka på en av tangenterna som följer:


- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen Och kort tryck på "**#**" Väljer hela texten
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**1**" Flyttar markören ett tecken åt vänster
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**2**" Flyttar markören ett tecken åt höger
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**3**" Kopiera den markerade texten
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**4**" Flyttar markören ett ord åt vänster
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**5**" Flyttar markören ett ord åt höger
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**6**": klipper ut den markerade texten
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**7**" Flyttar markören till början av texten
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**8**" Flyttar markören i slutet av texten
- Kontinuerlig press på "**Stjärna**"-knappen och kort tryck på "**9**" Klistra in den markerade texten

Android genvägar:


- Tryck och håll "**▲**"Upp-knappen för att öppna den aktuella sidans meny (samma som "**Meny**" .
- Tryck och håll "**▼**"Ner för att gå tillbaka till startskärmen när som helst (Samma som "**Hemskärm**" .
- Tryck och håll "**C**" För att gå tillbaka till föregående skärm (Samma som "**Tillbaka**" .

Gest kontroll över pekskärmen:

Hur man får en ljudbeskrivning av vad som finns på skärmen. Placera fingret på skärmen, dra det från höger till vänster sedan från vänster till höger. Du kommer att höra en röst över beskrivning av objekt som visas på skärmen.

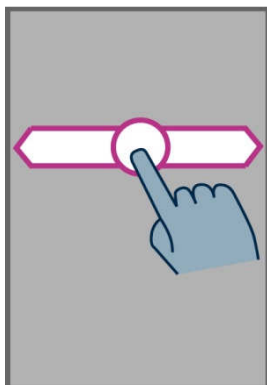


Hur man bläddrar och aktivera objekt på skärmen. flytta fingret på skärmen. Text-till-tal-funktionen kommer att berätta vilka objekt fingret svävar över.

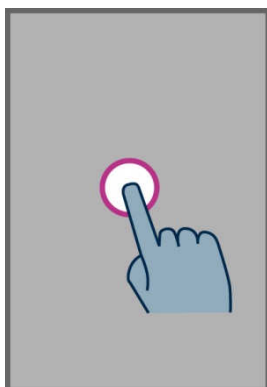


Aktivera detta alternativ genom att trycka "OK" tangenten utan att ta bort fingret från skärmen.


Hur får man tillbaka hemskärmen Sätter du fingret på skärmen, dra det upp sedan vänster. Du kan också flytta fingret nedåt och till mitten av skärmen, Röstfunktionen ange "Hemskärm". Tryck "OK" tangent utan ta bort fingret från skärmen.

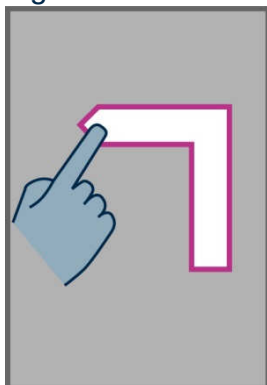


Hur flyttar jag tillbaka till föregående skärm Sätter du fingret på skärmen, dra ner sedan vänster utan att ta bort fingret på skärmen. Du kan också föra fingret nedåt och åt höger så kommer du att höra text-till-tal-funktionen säga "**Tillbaka**". Tryck sedan på "**OK**"-tangenter utan att ta bort fingret från skärmen.

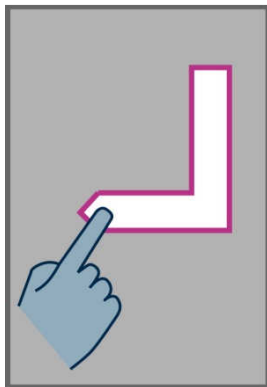


Så här öppnar du menyn eller alternativen för det aktiva programmet. Placera fingret på skärmen, dra det upp sedan höger utan att ta bort fingret. Du kan också föra fingret nedåt och åt vänster, röst över funktionen säger "**Meny**". Då trycker du på "**OK**" tangenten utan att ta bort fingret från skärmen.

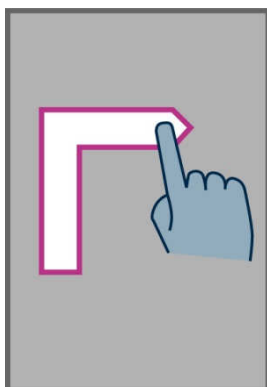

Hur man rullar en lista. Placera fingret på skärmen och dra det uppåt eller nedåt för att bläddra en sida eller en lista uppåt eller nedåt.

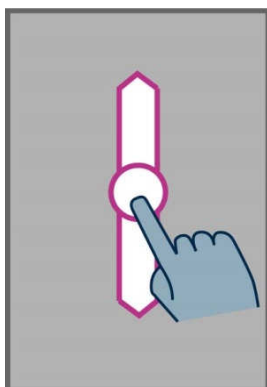

Hur man öppnar statusfältet "Noteringar", Placera fingret på skärmen och dra det från vänster till höger och ner. Röst över funktionen visar status för din smartphone (Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc ...), samt de senaste tio meddelandena.

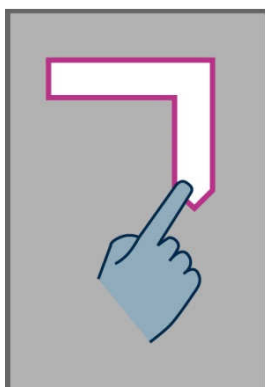


Det virtuella tangentbordet

För att skriva in text i inmatningsfältet, kan du använda knappsatsen men också det virtuella tangentbordet.

För att komma åt det virtuella tangentbordet, flytta fingret tills du trycker inmatningsfältet, tryck sedan **"OK"** tangenten utan ta bort fingret från skärmen.

De virtuella tangentbordets utseende ändras från numeriska till alfabetet för att passa innehållet i SmartVisions inmatningsfält.

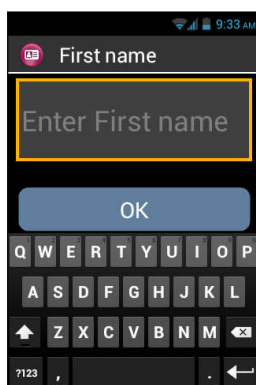

Välj det tecken som ska anges genom att föra fingret på botten av virtuella tangentbordet och bekräfta tecken genom att trycka knappsatsen **"OK"** tangent utan att ta bort fingret från skärmen.

Om du vill ange en siffra när endast alfabetiska tecken finns, tryck på "Symbol" knappen **?123** längst ned till vänster på det virtuella tangentbordet, växla sedan tillbaka till alfabetet med tryck på "ABC" knappen **ABC**.

Genom att trycka på **"Tillbaka"**  kommer du att stänga det virtuella tangentbordet.

Vänligen notera: Använd **"C"**-knappen på det fysiska tangentbordet för att radera ett skrivfel när som helst.

Röst gränssnitt

Befria dig från knappsatsen, antingen fysiskt eller virtuellt.

Om du vill aktivera röstläge, leta efter röststyrningsknappen som sitter på höger sida av telefonen, tryck.



SmartVision Röstgränssnitt integrerar den senaste generationen röstigenkänningsteknik som är en stor tillgång i denna smartphone. Med Röstgränssnittet kan du styra telefonen helt samt mata in text med hjälp av de två alternativen nedan:

- Kort tryck på navigationsknappen för att bläddra igenom olika skärmar och menyer, få information eller prestanda från enheten med hjälp av inbyggda sökord som röstkommandon.
- Långt tryck på navigationsknappen för att utföra tal-till-textinmatning i ett inmatningsfält.


Följande sidor fokuserar på röststyrningsgränssnitt.

Vänligen notera: för att förbättra röststyrning prestanda bör du använda det i en lugn miljö och tala tydligt.

Styra skärmarna genom röstkommandon

Röststyrningsfunktionen aktiverar ljudbeskrivning av alla texter som visas på din SmartVision och befriar dig från att använda den fysiska eller icke fysiska tangentbordet.

1. **Tryck och släpp** röststyrningsknappen (kort tryckning), en signal hörs och "Röststyrning" öppnas.

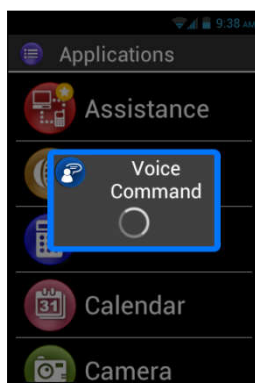

2. Uttala tydligt visade texten för att aktivera skärmläsare, till exempel ett programnamn eller ett objekt i en lista.

Varning: Skärmläsning av poster som inte visas på skärmen är inte möjligt.


Röstkommando

Ett röstkommando är en ljudinstruktion som ges av användaren med hjälp av sin egen röst. Syftet är att få ljudinformation från din SmartVision, Aktivera eller inaktivera en funktion, eller utföra mer komplicerade operationer på enheten.

Röstkommandon hanteras genom tangentord som är fördefinierade och införlivats i produkten. Du kan använda dessa kommandon när som helst och under alla omständigheter.



1. **Tryck och släpp** röststyrningsknappen (kort tryckning), hörs ett pip.

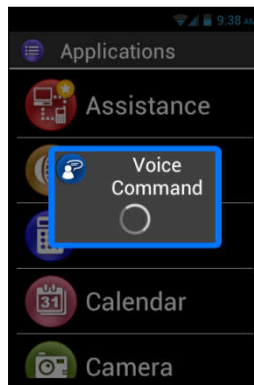

2. "**Röststyrning**" öppnas, säg tydligt sökord, till exempel "**Vad är klockan?**"

Svaret ges av Smart**Vision**'s text-till-tal-funktion, till exempel: "**It's1: 46pm**".

Här är ytterligare två exempel på röstkommandon.

Du vill ringa ett samtal till Paul Thomas

1. Tryck kort på röststyrningsknappen. Ett pip hörs. Du uppmanas att diktera ett kommando.
2. Det finns två möjliga kommandon:
 - "**Ring Paul Thomas**" Om denna kontakt har lagts till i din "**Kontakt**"-lista.
 - "**Ring Paul Thomas mobil**" Om flera nummer har spelats in för den här kontakten.
3. Systemet ber om bekräftelse, bekräftar att ditt samtal kopplas till Paul Thomas.

Du vill stänga av ringläge på din SmartVision****

1. Gör ett kort tryck. Ett pip hörs. Skärmen frågar efter ditt kommando.
2. Säg "**Aktivera tyst läge**".
3. Ringläget är avaktiverat när Smart**Vision** växlar till tyst läge.

Röstkommando tangentord

Följande röstkommandon har införts i produkten och är de enda ord som känns igen av SmartVision.

SmartVision tangentord delas in i tre kategorier:

- Sökord för att få information om din smartphone nuvarande status.
- Sökord för att aktivera eller inaktivera en inställning eller ett alternativ.
- Tangentord för att hantera kommandon och alternativ i ett program.

Tangentord om SmartVision'S olika status

Vad är klockan?	Ger den aktuella tiden.
Datum?	Ger dagens datum.
Tangentord?	Ger en lista över alla aktiva sökord just nu.
Batterinivå?	Ger batteri laddning.
Nätverksstatus?	Ger operatörens signalstyrka.
Wi-Fi-status?	Ger Wi-Fi Status (ansluten eller frånkopplad).
Bluetooth-status?	Ger Bluetooth aktuell status (ansluten eller frånkopplad).
GPS-status?	Ger GPS Status (ansluten eller frånkopplad).
NFC status? (1)	Ger NFC aktuell status (ansluten eller frånkopplad) ⁽¹⁾ .
Ringsignal status?	Ger ringläge aktuell inställning (standard, tystnad, möte).
Telefonstatus?	Ger telefondriftläge (Wi-Fi, GPS, Bluetooth).

⁽¹⁾ : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

Tangentord som används för att aktivera en funktion eller en inställning

Meny	Öppnar menyn för den aktuella applikationen.
Hem	Åter till huvudskärmen.
Tillbaka	Visar föregående skärm.
Meddelanden	Öppnar statusmeddelandefältet.
Aktivera GPS	Aktiverar GPS lokalisering.
Inaktivera GPS	Stänger GPS lokalisering.
Aktivera Wi-Fi	Aktiverar Wifi.
Avaktivera Wi-Fi	Inaktiverar Wifi.
Aktivera Bluetooth	Aktiverar Bluetooth.
Inaktivera Bluetooth	Stänger Bluetooth.
Aktivera NFC (1)	Aktiverar NFC-läsare ⁽¹⁾ .
Inaktivera NFC (1)	Stänger av NFC-läsare ⁽¹⁾ .
Aktivera Standard ringsignal	Aktiverar standardringläge med ringsignal och vibration.
Aktivera tyst läge	Aktiverar vibrationsringläge.
Aktivera möte läge	Stänger av ringsignalen och vibration.
Aktivera utomhusläge	Aktiverar ringsignal till maximal volym.
Volym upp	Höjer högtalarvolymen.
Volym ner	Sänker högtalarvolymen.

⁽¹⁾ : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

Applikationsspecifika sökord

"**Starta programmet**" Följt av namnet på programmet. Det namngivna programmet startas Exempel: "**Starta programmet Förstoring**".

"**Skicka meddelande till**" Följt av namnet på kontakten. Ett meddelande skapas för den namngivna kontakt Exempel: "**Skicka meddelande till Paul Thomas**".


"**Ring**" följt av namnet på den kontakta: ett samtal skickas till kontaktperson. Exempel: "**Ring Paul Thomas**".

"**Ring**" följt av namnet på den kontakt och "**Mobil**" eller "**Kontors**": Ett samtal görs till den namngivna kontakten på hans/hennes mobila eller kontorslinje. Exempel: "**Ring Paul Thomas Mobil**".

Tal-till-text eller Dikteläge


Röstgränssnittet gör det också möjligt att mata in text i ett textfält med hjälp av tal-till-text. Den här funktionen är särskilt användbar för att skriva meddelande eller e-post, webbsökning eller röstuppringning ett telefonnummer.

1. När ett textfält visas, är smartphone klar för dikteringsläge.

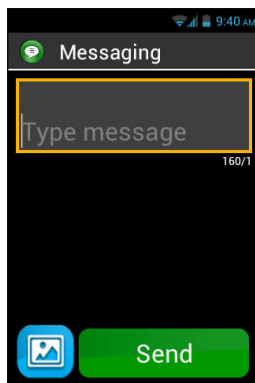


2. **Tryck och håll** röststyrningsknappen medan du dikterar din text, hela tiden.
Exempel:

"**Diktering**" när fönstret visas tala klart och hörbart: "**Vill du komma över på lunch nästa söndag?**"

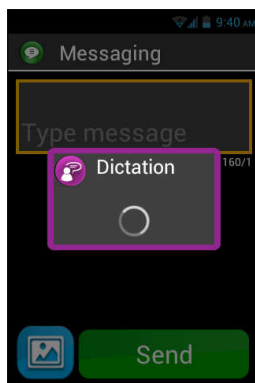


3. **Släpp** röststyrningstangenten när diktamen är klar.
4. Den dikterade texten visas i textfältet.

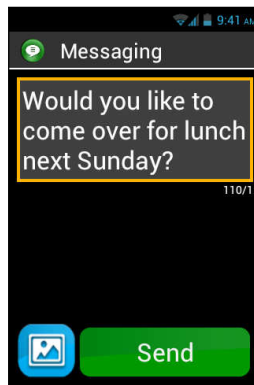

Vänligen notera: att lägga skiljetecken (,! ...?), måste du uttala namnet på skiljetecknet du vill ha. Exempel: "**Vill du komma över på lunch nästa söndag frågetecken**".

Vänligen notera: Tal-till-text kan användas i upp till 30 sekunder åt gången.

Varning: Tal-till-text funktion kräver en dataanslutning som t.ex. Wi-Fi eller 3G. Om du inte är ansluten till ett datanätverk eller om anslutningshastigheten är för låg, kommer tjänsten inte att vara tillgänglig och du kommer att få följande varning.

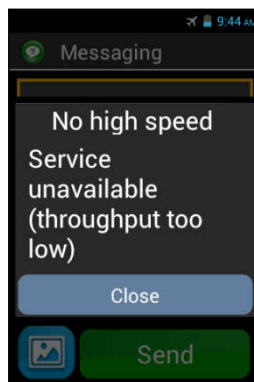

Du är fri att använda 3 gränssnitt på din Smart**Vision**, Antingen separat eller i tur och ordning. Du kan börja med pekskärmen läge och fortsätta med röststyrning läge eller tvärtom, som beskrivs i exemplet nedan.

Öppna "**Meddelanden**" Programmet genom att klicka på "**Meddelanden**"-ikonen  från pekskärmen. Så snart inmatningsfältet visas används tal-till-text för ditt meddelande. För att göra detta, tryck och håll röststyrningsknappen medan du dikterar. Släpp knappen vid slutet av meddelandet, du trycker snabbt på samma knapp för att "**Skicka**".

Skärmläsning

SmartVision är utrustad med en talsyntes som läser innehållet på skärmen för att er.

Skärmläsning sker i följande fall:

- En ny skärm visas, titel och den markerade posten läses upp för dig.
- Ett nytt objekt har valts.
- Ett kommando har utförts, såsom att möjliggöra ett alternativ.
- En oväntad händelse inträffar, såsom att telefonen går in skärm-av läge eller tar emot ett inkommande meddelande.
- Samtidigt navigera på skärmen med fingret, det berörda objektet identifieras för dig via text-till-tal.

Du får reda på mer om text-till-tal funktion när du använder den på din SmartVision.

Vänligen notera: när du för fingret från vänster till höger och sedan från höger till vänster för att få en röst över fullständig beskrivning av skärmen, måste fingret vara kvar på skärmen för att kommandot ska fungera.

Du kan också använda knappsetsens styrning: långt tryck på "Fyrkant"  tangent och tryck sedan på "2":

Hemskärm

Startskärmen fungerar som en startmeny där du kan starta valfritt program du behöver.



För att gå tillbaka till startskärmen, tryck på "Home" knappen . Den mittersta knappen under skärmen.

Startskärmen visar Smart**V**isions sex grundfunktioner.



"Telefon" Är ett program för att ringa samtal, inspelning missade samtal och komma åt din röstbrevlåda.



"Meddelanden" Är en applikation för att skicka, läsa SMS/MMS (kort meddelande med multimedialagor såsom bilder, bilder eller videoklipp, etc ...).



"E-post" Är ett program för att skicka och ta emot e-post, du måste ha ett e-postkonto korrekt inställt.



"Inställningar", det här programmet ändrar inställningarna på telefonen.



"Applikationer", det här programmet visar en lista där du kan komma åt alla program som finns på din Smart**V**ision.




"Favoriter" Denna applikation lagrar alla föreslagna eller dina mest använda program (SOS, kalkylator, eller förstöringsglas, till exempel) inom ramen för denna särskilda katalog.

När någon av ovanstående ikoner visas flaggas med en röd bubbla ● som innehåller ett antal, det innebär att det finns en eller flera händelser för denna applikation (t.ex. missade samtal eller inkommande meddelanden).

Statusmeddelandefältet

Statusraden är den första raden av ikoner som ligger på toppen av displayen.

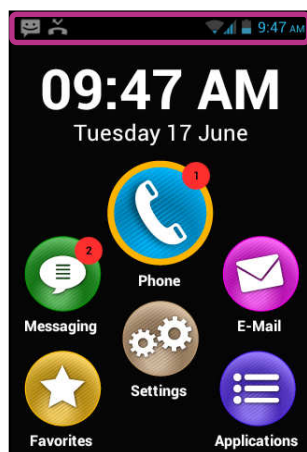

Statusikoner är till höger och varningsikoner (relaterade till olika applikationer) är till vänster.

Vänligen notera: Du kan kontrollera status för din SmartVision när som helst genom att skicka ett "**Telefonstatus**" Röstkommando, eller använd långt tryck på "Bindestreck" knappen följt av tangenten " 2 ".

Prover av statusikoner:



Batteriets laddningsnivå indikator.



Nätets signalstyrkeindikator.



Wi-Fi indikator för signalstyrka.

Exempel på meddelandeikoner:



Du har olästa meddelanden.




Missat samtal.



Du har röstmeddelanden.

Statusraden ger tillgång till panelens meddelanden där alla varningar och händelser i din smartphone har rapporterats. Tack vare dessa meddelanden, vet du exakt vilken händelse som har inträffat på din smartphone.

För att bläddra i panelen öppna den genom att föra fingret från toppen av displayen mot botten fingret måste kvar på skärmen under hela kommandot för att det ska fungera.

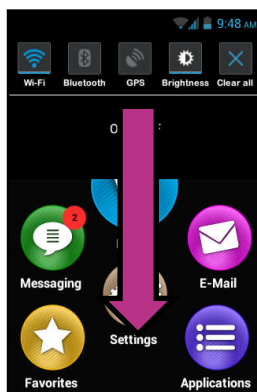

Vänligen notera: Du kan också använda knappsetsens styrning: långt tryck på **"Fyrkant"**  tangent och tryck sedan på **"3"** För att öppna meddelandepanelen.

SmartVision's inställningar finns på den övre delen av panelen anmälan.

Dessa är, från vänster till höger:



Aktivera/Avaktivera Wi-Fi-anslutning.

Aktivera/Inaktivera Bluetooth.

Aktivera/Avaktivera GPS lokalisering.

Justera bildskärmens ljusstyrka (Auto/Nivå 1/Nivå 2/Nivå 3).

Radera alla händelser

Meddelanden i den nedre delen beskriver de olika inkommande händelserna.


När du väljer en händelse från den här panelen, öppnas motsvarande program direkt. Till exempel, om du väljer ett missat samtal  SmartVision öppnar **"Historik"** fönstret i **"Telefon"** applikationen där missade samtal sparas. Du kan välja det missade samtalet (nummer eller kontaktnamn) för att ringa tillbaka numret/kontakten. Meddelanden raderas automatiskt efter att de läses.

I denna panel ingår även meddelanden såsom varningar, uppdateringar, etc. ...

Stäng meddelandeskärmen genom att trycka på **"Tillbaka"**  knappen.

Applikationer


Från startskärmen, tryck på knappen "**Applikationer**"-ikonen  och hitta en lista över alla program som finns i din SmartVision. Dessa program är listade i alfabetisk ordning.

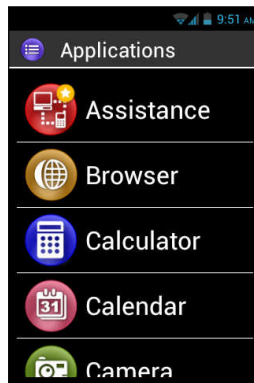

För att starta ett program, bläddra i listan tills du når önskat program och välj det.

Vänligen notera: Du kan också använda röststyrning funktionen för att starta ett program, genom att skicka ett "**Starta programmet**" Kommando följt av programnamnet.

Du kan omorganisera programmen i ett rutnät, för att göra så trycker du på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Genom matris**".

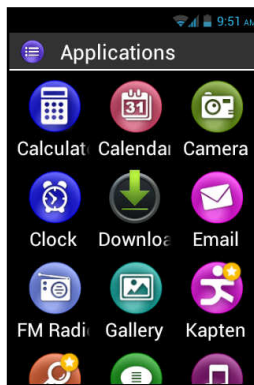

Listan över förinstallerade program på din SmartVision kan variera beroende på land, telefontjänsteleverantörer och konfigurationen av produkten.

Vänligen notera: Du kan snabbt nå ett objekt i listan över program med hjälp av knapparna 2-9 på knappsatsen. Till exempel att trycka på "**6**"  knappen för att välja den första applikation som börjar med bokstaven "M". Tryck två gånger "**6**"  knappen för att välja den första applikation som börjar med bokstaven "N" etc. "**Stjärna**" och "**Fyrkant**" Knapparna för att snabbt komma i början och slutet av listan.


Favoriter

"**Favoriter**" 🌟 applikationen är en av SmartVisions mest bekväma funktioner och är tillgänglig från startskärmen. Det fungerar som en katalog där föredragna applikationer eller de som du använder oftast lagras.


Skapa en favorit

Till exempel lägg till "**Kalkylator**" Applikationen i "**Favoriter**".

1. På startskärmen, välj "**Applikationer**" 📁.
2. Bläddra i listan tills "**Kalkylator**" 🧮 applikation är markerat.

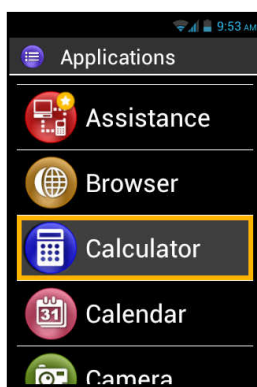


3. Tryck och håll "**OK**" Knappen på knappsatsen för att öppna snabbmenyn.
4. Från denna snabbmeny, klicka på "**Infoga till favorit**" för att spara "**Kalkylator**" i dina önskade program.

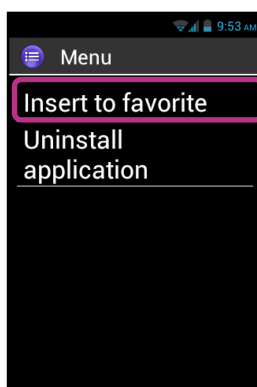

5. Bekräfta med "**Ja**".

"**Kalkylator**" Applikationen kan nu nås direkt från skärmen "**Favoriter**".

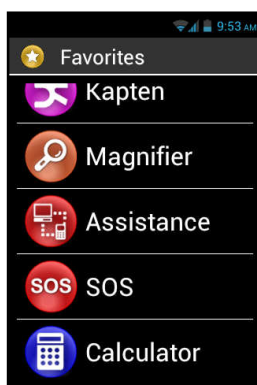

Hantera favoriter

För att ta bort ett favoritprogram, öppna "**Favoriter**" Menyn, klicka på programmet som ska tas bort, tryck och håll knappsatsens "**OK**" Knapp. Klicka på "**Ta bort från favoriter**" i snabbmenyn och bekräfta raderingen med "**Ja**".

För att organisera dina program i listan, klicka på alternativen "**Upp i listan**" eller "**Ner i listan**" från snabbmenyn.


Vänligen notera: samma sätt används för en förteckning över applikationer, om du önskar ett matrisformat (linjer/kolumner) genom att trycka på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Genom matris**".

Telefon


"**Telefon**"  tillämpningen i SmartVision är en användarvänlig funktion med en mängd alternativ.

Hur man ringer?

1. Från hemskärmen klickar du på "**Telefon**"  ikon, visas i programmens huvudskärm.

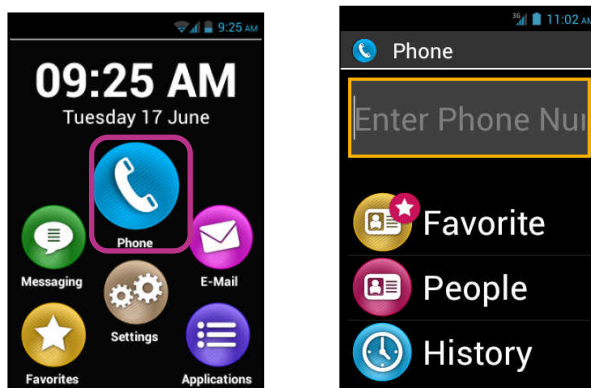


2. Du kan antingen skriva in nummer med telefonens knappsats, eller hämta ett nummer från "**Kontakter**", ett kontaktnamn från "**Favorit**", Eller från samtal i "**Historik**".
3. När numret eller kontaktnamn har angetts, tryck på knappsatsen "**OK**" Knappen för att sända iväg samtalet.

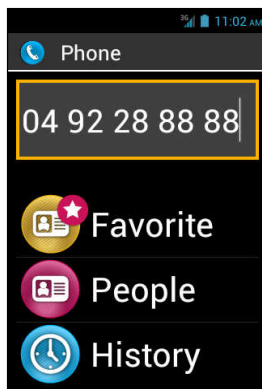

4. Skärmen visar att samtalet pågår. Tryck på "**Slut**"  tangent i slutet av samtalet, eller den "**C**" Knappen för att lägga på. Enheten kommer att visa "**Slut**".

Vänligen notera: Använd ett långt tryck på tangentbordet "0" för att göra ett "+" för utlandssamtal

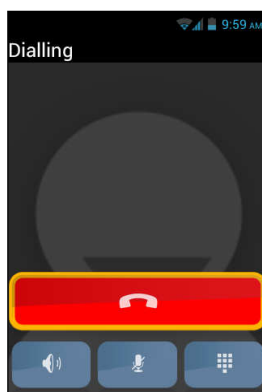

Under ett samtal, kommer de tre följande ikoner visar längst ner på skärmen, erbjuder dig ytterligare 3 alternativ:



Slå på högtalaren (handsfree-läge).



Stänga av mikrofonen.



Visa det virtuella tangentbordet för att knappa in siffror när du använder en automatiserad svarstjänst.


Ovanstående alternativ finns också med hjälp av "**Meny**"  knappen.

Vänligen notera: när tillgänglighetsläget är aktiverat, kan du växla till handsfree-läge och slå på högtalaren genom att trycka och hålla röststyrningsknappen (på höger sida av smarttelefonen). Växla tillbaka till ljudläget genom att trycka och hålla röststyrningsknappen igen.

Hantera telefonsamtal

I **"Telefon"** Programmet kan du hantera dina telefonnummer med prioriteringar. När du är i **"Telefon"** applikationen och trycker på **"Meny"**  knappen visas en meny:

"Kortnummer" Alternativet kan du ställa in ditt favoritnummer för direkt åtkomst från knappsatsen.

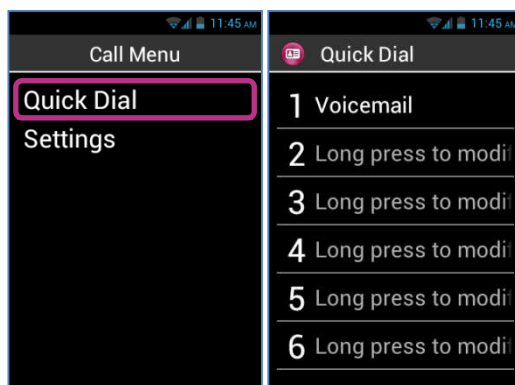

Till exempel, om du vill spara ett telefonnummer som du använder ofta för en snabb åtkomst genom att tilldela till sifferknapp "2"  på knappsatsen. Först klickar du på **"Kortnummer"**, Klicka sedan på rad två att välj 2. Tryck och håll **"OK"** och ange de begärda uppgifter, klicka sedan på **"OK"** för att bekräfta. Nästa gång du ringer det här numret, trycker du bara på och håller tangenten "2"  på knappsatsen på startskärmen.

Smart**Vision** kommer automatiskt att göra uppringning och skicka samtalet.

Vänligen notera: sifferknapp "1"  är tillägnad direkt tillgång till Smart**Vision** röstbrevlåda, den kan vara förinställd av teleoperatör beroende på ditt kontrakt och SIM-kort.


Alternativet **"Inställningar"** kan konfigurera **"Telefon"** Applikationsspecifika alternativ för att passa dina preferenser:

- **"Ringsignal"** Aktivera eller inaktivera ring/vibration.
- **"Röstbrevlåda"**: Välj en tjänst och ställa in din telefons röstbrevlåda.
- **"Vidarekoppling"** Vidarebefordra inkommande samtal till ett annat nummer.
- **"Samtalsspärrar"** Förbjuda utgående och inkommande samtal på din Smart**Vision** medan du är utomlands, till exempel.
- **"Missat samtal anmälan"**: Aktivera eller inaktivera inkommande samtal varningar.
- **"Fasta uppringningsnummer"** Begränsa samtalen till specifika nummer som sparats på SIM-kortet.
- **"Snabb svar"**: Skicka ett snabbt svar med hjälp av en SMS-mall.
- **"Nummerpresentation"**: Visa eller dölja ditt telefonnummer.
- **"Samtal väntar"** Aktivera Samtal väntar alternativet.
- **"Cell Broadcast"**: Ta emot meddelanden från nätverket.

- "**Minut påminnelse**": En ljudsignal varje minut under ett samtal.
- "**TTY-läge**": Aktivera eller inaktivera dataöverföringsläge.

Hur man svara på ett samtal?

När du får ett inkommande samtal, är en ringsignal hörs. Enheten visar omedelbart två knappar: "**Acceptera**" och "**Neka**", Även när skärmen är i avstängt läge.

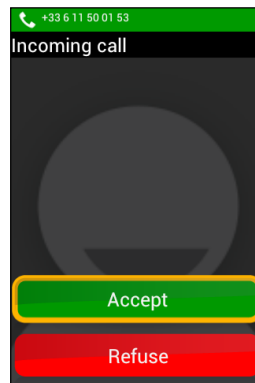

Den som ringer numret visas i stort format på högst upp på skärmen.

Om den som ringer är en kontakt som har lagts till listan över "**Kontakter**", Kommer hans/hennes namn visas i stället för telefonnumret.

Tryck på "**OK**" Knappen på knappsatsen eller "**Acceptera**" Knappen på skärmen om du vill svara på. Om du vill avvisa samtalet klickar du på "**C**"-knappen Eller välj "**Neka**" Från skärmen.

Vänligen notera: Du kan också plocka upp ett samtal genom att trycka på en tangent från 0 till 9 eller Fyrkant (#) eller stjärna (*) om "Plocka upp inkommande samtal genom att trycka på någon sifferknapp" är ikryssad från tillgänglighetsparametrar.

Om du har missat ett samtal, kommer detta samtal att listas i samtalet "**Historik**" som ett missat samtal, med en röd pil . Du kommer att kunna ringa tillbaka genom att välja detta nummer eller kontakt från menyn Historik.

Det missade samtalet kommer också att visas på startskärmen med en röd bubbla över


"**Telefon**"  ikon och en meddelandesignal i panelen anmälan. Om du klickar på det missade samtalet från dessa platser, når du omedelbart "**Historik**"-menyn.

Vänligen notera: missade samtal kan också indikeras av  röstmeddelande symbol i statusfältet. Se nästa sida för att lära dig Smart**Vision** röstmeddelande fungerar.

Röstbrevlåda

Smart**Vision** är utrustad med ett röstmeddelande som fungerar som en telefonsvarare. Konfiguration och funktioner i röstbrevlådan beroende på din tjänsteleverantör.

För att ställa in din röstbrevlåda, klicka på "**Telefon**". Tryck på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Inställningar**", Sedan på "**Röstbrevlåda**". Ange numret för röstbrevlådan från din teleoperatör och bekräfta.

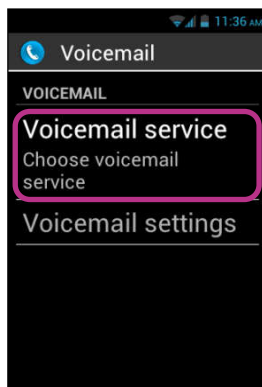


När en uppringare lämnar dig ett röstmeddelande, kommer meddelandet att visas i statusfältet med röstbrevlåda  symbolen. Om du vill lyssna till röstmeddelandet, ringer du upp röstbrevlådan med ett långt tryck på sifferknappen "1"  från den fysiska knappsatsen.

Samtalshistorik

Meny "**Historik**" rubricerar samtal nyligen som gjort eller tas emot av dig. De är listade från nyare till äldre.

Den här funktionen ger två fördelar: det håller dig informerad om alla samtal som du har missat, och ger dig direkt tillgång till telefonnummer och kontakter.

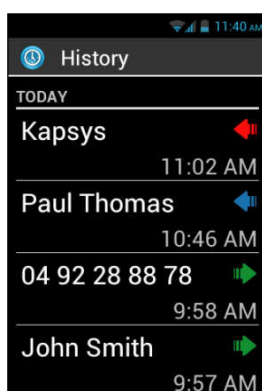


Smart**Vision** utnyttjar symbolerna nedan för varje samtal:

-  Blå pil för att indikera ett inkommande samtal, antingen accepteras eller förkastas av dig.
-  Grön pil för att indikera ett utgående samtal görs av dig.
-  Röd pil för att indikera ett missat samtal.


Ringa ett nummer eller en kontakt från samtalshistoriken

Om du vill ringa tillbaka ett nummer eller en kontakt från Samtalshistorik, klickar du bara på numret/kontakten från den här skärmen, och samtalet görs omedelbart.

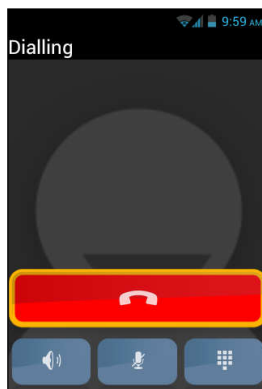

Avsluta samtalet genom att trycka på "C" Knappen på knappsatsen eller tryck på "Lägg på"  ikonen för att avsluta samtalet.

Du kan också ringa upp ett missat samtal från panelen Noteringar , så här:

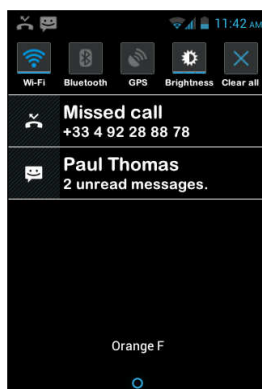

- Öppna meddelandepanelen.
- Välj det missade samtalet, du kommer att nå "**Historik**"-menyn i din smartphone.


Vänligen notera: För att ta bort ett objekt från historiken markerar du det och trycker och håller "**OK**"-knappen Och välj sedan från snabbmenyn posten" ta bort från samtalsloggen ". Du kan också ta bort all samtalshistorik från menyn i Historik "sidan.

Meddelanden


I "**Meddelanden**"  programmet kan du skicka och ta emot textmeddelanden eller SMS och MMS (textmeddelanden som innehåller en multimediaobjekt såsom en bild eller ett videoklipp, etc.)

Hur man skickar ett meddelande?


1. Från hemskärmen klickar du på "**Meddelanden**"  ikonen.
2. Klicka på "**Nytt meddelande**" På toppen av skärmen.

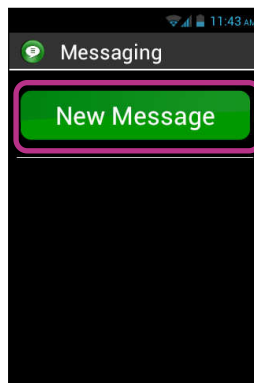


3. Det finns flera alternativ för att ange mottagarens uppgifter: skriver hans/hennes telefonnummer i "**Till**" Inmatningsfältet med hjälp av knappsatsen, eller välj en mottagare i "**Kontakter**" listan, eller välj din kontakt från "**Favorit**"-menyn.

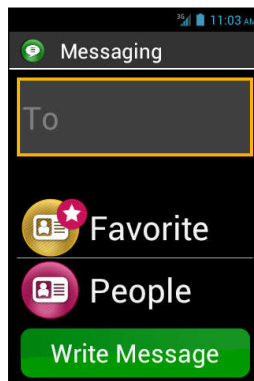

4. När mottagarens uppgifter matas in, klicka på "**Skriv meddelande**". "**Skriv meddelande**" visas.

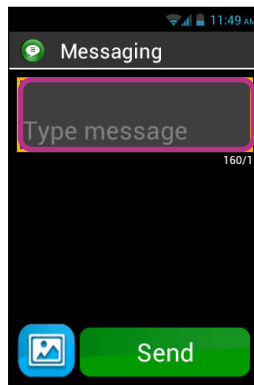

5. Skriv ditt meddelande i textfältet med hjälp av fysiska tangentbordet, det virtuella tangentbordet eller tal-till-text (tryck och håll röststyrning för att diktera).

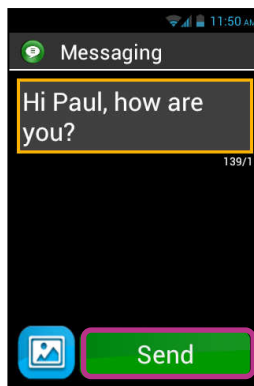


6. När posten är klar klickar du på "**Skicka**", ditt meddelande kommer skickas.

Vänligen notera: Om du vill bifoga en bild eller en video till ditt meddelande, klicka på bifoga  symbol på skärmen nere till vänster, eller tryck på "**Meny**"  knappen. Genom meny kommer du också att kunna lägga till eller ta bort en mottagare.

Meddelanden Meny Alternativ

Klicka på "**Meddelanden**"  ikonerna från hemskärmen. Tryck på "**Meny**"  för att komma till "**Meddelanden**" applikationens olika alternativ.

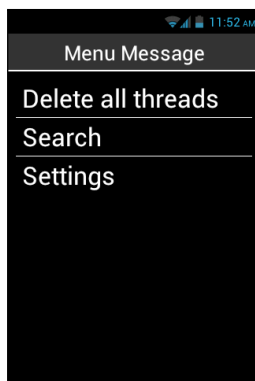


Alternativen nedan kan du konfigurera "**Meddelanden**" Program för att passa dina egna önskemål.

- "**Ta bort alla trådar**" Raderar alla ämnen som lagras på din smartphone.
- "**Sök**": Tillåter sökning efter ett meddelande på din smartphone.
- "**Inställningar**":
 - "**Lagringsinställningar**" Överföra ditt SMS till och från SIM-kortet och ställa lagringskapaciteten med ett maximalt antal SMS/MMS.
 - "**Meddelandeinställningar**": Ställ en varning (ringningar eller vibrationer) för ett inkommande meddelande.
 - "**Text-meddelande (SMS) inställningar**": Konfigurera textmeddelanden alternativ.
 - "**MMS inställningar**": Konfigurera multimediameddelanden alternativ.

Läs ett SMS/MMS


Du har fått ett meddelande som anmäls till dig genom att "**Meddelanden**"-ikonerna flaggas med en röd bubbla med ett antal, på startskärmen. Ett meddelande visas också i panelen Noteringar.

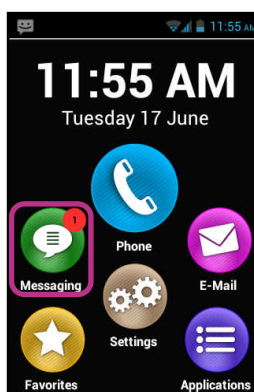

För att läsa dina mottagna meddelanden från hemskrmen klickar du på "**Meddelanden**"  ikon eller på "**Nytt meddelande**" från meddelandeskrmen.


Meddelanden som skickas eller tas emot listas efter mottagare eller "diskussionstråd". Diskussionstrådar med olästa meddelanden placeras på toppen av listan med en blå triangel .

För att visa innehållet i meddelandet, klicka på diskussionstråden som du vill i listan.

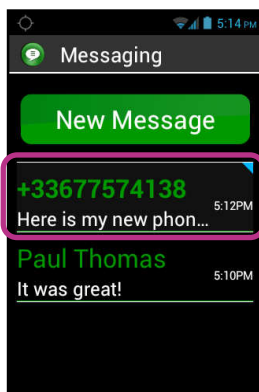

Skickade och mottagna meddelanden i kronologisk ordning från nyare längst ner i listan för att äldre går upp, och är färgkodade för att skilja dem:

- **Gröna** meddelanden är meddelanden som skickas av dig.
- **Blåa** meddelanden är meddelanden mottagna av dig.
- **Röda** meddelanden är meddelanden som inte skickats eller meddelanden som skickas.

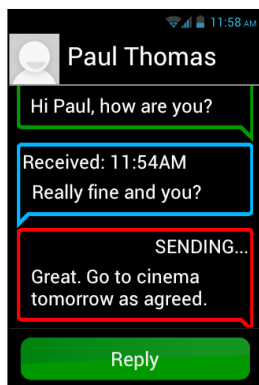

Radera ett SMS/MMS

Om du vill radera en diskussionstråd eller ett meddelande, väljer du objektet som ska tas bort, tryck och håll "**OK**" Knappen på tangentbordet. En snabbmeny öppnas, klicka på "**Radera**" för att ta bort det markerade objektet.

Du kan även få tillgång till en diskussionstråd och ett meddelanderelaterade alternativ genom att trycka på "**Meny**"  knappen.


E-post

I "E-post"  programmet kan du skicka och ta emot e-post från ditt e-postkonto. "E-post"  tillämpningen i SmartVision kommer inte att fungera om du inte har ett befintligt e-postkonto med en e-postleverantör.


E-postkonto inställningar

När du öppnar "E-post" programmet för första gången, måste du ställa in ditt e-postkonto. Du måste ha e-postkonto informationen till hands, såsom din e-postadress och lösenord.

På startskärmen, klicka på "E-post"  ikon. En konto uppsättningsskärm visas.

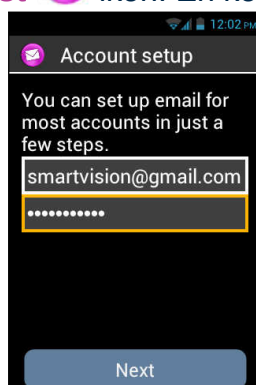

1. Ange din e-postadress.
2. Ange ditt lösenord.
3. Klicka på "Nästa".
4. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att ställa in ditt e-postkonto (kontroll av inkommande och utgående e-postservrar).

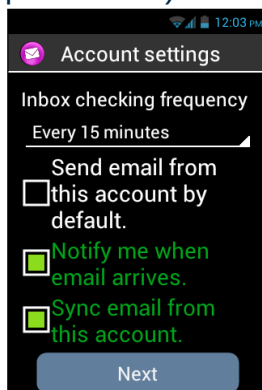


5. SmartVision initierar kontrollförfarandet. Nu måste du konfigurera följande alternativ för ditt e-postkonto: E-post hämtningsfrekvens, Meddelanden, Automatisk nedladdning, etc ...
6. Klicka på "Nästa" För att avsluta proceduren. Synkronisering av ditt konto är igång, och din inkorg visas.


Vänligen notera: vissa e-postkonton kan ha speciella konfigurationsalternativ, se vår hemsida www.kapsys.com, Avsnittet "Stöd", För mer information.

Skicka ett e-postmeddelande

1. På startskärmen, klicka på "**E-post**"  applikationen. Inkorgen visas.
2. Klicka på "**Komponera**".

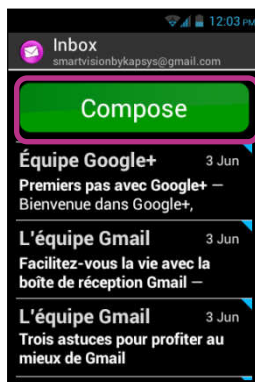

3. Skriv in mottagaren i "**Till**"-fältet, Rubrik för din e-post i "**Ämne**" och sedan den fullständiga texten i "**Komponera e-post**" textfältet.
För ytterligare alternativ - infoga en bifogad fil, lägga till fler mottagare, etc. - se instruktionerna nedan.

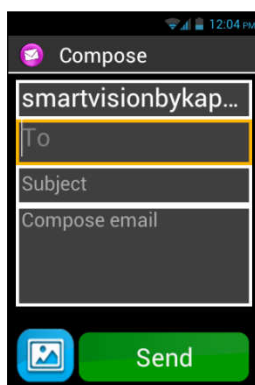


4. Klicka på "**Skicka**" när du är färdig med meddelandet och vill skicka din e-post.

Ytterligare tillgängliga alternativ:

- Om du vill lägga till en bilaga till e-post (foto, musik, Fil ...): Klicka på den bifogade filen  piktogram längst ner till vänster på skärmen, eller tryck på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Bifoga fil**" från listan med alternativ.
- Om du vill lägga till en mottagare genom att trycka på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Lägg till kopia/hemlig kopia**".
- För att spara meddelandet för att skicka det senare trycker du på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Spara utkast**".
- Om du vill ta bort meddelandet utan att spara kan du trycka på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Kasta**". Du kan också ta bort ett e-postmeddelande att göra en lång tryckning på e-post från inkorgen.


Ta emot och läsa ett e-postmeddelande

När du får e-post, kommer hemskärmen visa att ikonen E-post flaggas med en röd bubbla.

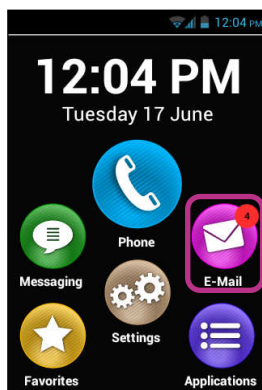

Detta kommer också att meddelas dig via statusfältet (förutsatt att alternativet "**E-post anmälan**" har aktiverats när du ställer in ditt e-postkonto).

För att komma åt inkorgen och läsa dina inkommande e-post, klicka på "**E-post**"  applikation från hemskärmen, eller på den nya e-postmeddelande från meddelandeskärmen.

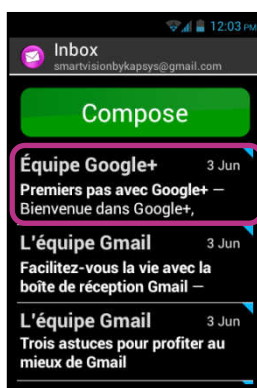

Klicka på det nya meddelandet. E-post som är olästa placeras på toppen av listan och är flaggade med .

För att läsa innehåller i e-post kan du också använda "**textläge**" alternativet i "**meny**"  detta alternativ ger bättre och enklare uttal.

När läsningen är klar, kan du trycka på "**meny**" igen och "**svara**" eller "**Vidarebefordra**" E-post. Du kan också "**dra**" det till en annan mapp eller "**radera**" det.

Ta bort ett e-postmeddelande

Du kan ta bort enstaka e-post eller gruppvis.

Om du vill radera en enstaka e-post, öppna helt enkelt e-postmeddelandet som du vill ta bort och välj "**Radera**" från "**Meny**".

Det är också möjligt att ta bort ett e-postmeddelande utan att rådfråga. I så fall väljer du i listan över e-post, e-post du vill ta bort och utföra ett långt tryck på "**OK**"-knappen. Välj sedan "**Radera**".

Om du vill radera en grupp av e-post genom att trycka på "**Meny**" Från listan över e-post och välj "**Starta flera val**".

När "**Flera val**" är aktiverad i listan över e-postmeddelanden visas igen och en kort tryck på "**OK**"-knappen markerar den valda e-posten. Om du vill markera alla e-postmeddelanden, trycker du på "**Meny**" sedan "**Välj alla**". Om du vill radera e-postmeddelanden som har markerats, tryck på "**Meny**" igen och "**Radera alla valda**."

Vänligen notera: Flera val inaktiveras automatiskt efter en strykning.

Hantera e-postkonton

Du kan lägga till, redigera eller ta bort e-postkonton i din Smart**Vision**.

- Om du vill ändra kontokonfiguration genom att trycka på "**Meny**"  knappen, klicka på "**Inställningar**", Och välj det konto som ska redigeras.
- Om du vill ta bort ett konto genom att trycka på "**Meny**"  knappen, klicka på "**Inställningar**" Väljer du det konto som ska tas bort, klicka på "**Ta bort konto**" i slutet av listan.
- Om du vill lägga till ett konto genom att trycka på "**Meny**"  knappen, klicka på "**Inställningar**", Sedan på "**Meny**"  och slutligen på "**Lägg till konto**".
- Om du vill ändra konto trycker du på "**Meny**"  knappen, klicka på "**Inställningar**", och välj det konto som ska användas, från listan.

Vänligen notera: Du kan också hantera dina e-postkonton från hemskärmen med att klicka på "**Inställningar**"  ikon, sedan på "**Konton och synkronisering**".

Inställningar

Parametrarna och inställningar för din SmartVision kan hittas under "**Inställningar**"


 applikationen. Denna applikation kan även nås från startskärmen för att aktivera och inaktivera vissa funktioner eller ändra befintliga inställningar.

SmartVision levereras med ett antal redigerbara standardinställningar såsom tidsinställning, språkalternativ, visningsformat, etc.

Redigera en inställning

Så här redigerar du en inställning:

1. På startskärmen, klicka på "**Inställningar**" . Listan över inställningar visas.

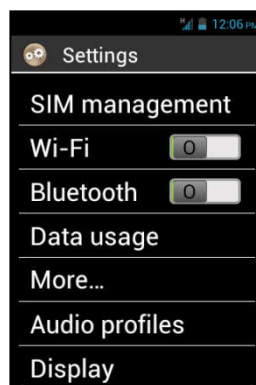

2. Bläddra i listan och välj den kategori av inställning som ska redigeras.
3. När alla inställningar har redigerats, tryck på knappen "**Hemskärm**"  knappen för att spara dina ändringar.

SmartVision inställningar är organiserade i kategorier såsom:

- "**SIM-förvaltning**" Hantera inställningarna SIM-kort.
- "**Wifi**": Aktivera och hantera Wi-Fi-anslutning.
- "**Bluetooth**": Aktivera och hantera samband med tillbehör och Bluetooth kringutrustning.
- "**Dataanvändning**": Aktivera och övervaka dataanvändning.
- "**Mer ...**" Konfiguration och anslutning till trådlösa nätverk (Mobila nätverk, NFC (1), datanät ...).
- "**Ljud profiler**" Konfigurera ljudinställningar på handenheten (ringsignal, meddelandesignaler, ljud volym, ...).
- "**Display**": Konfigurera bildskärmsinställningarna (teckenstorlek, ljusstyrka, tapeter, etc.).
- "**Lagring**" Hantera lagringsutrymme genom applikation.
- "**Batteri**" Monitor batterianvändning
- "**Appar**" Hantera program som är installerade i din produkt.
- "**Konton och synkronisering**" Hantera dina e-postkonton och synkronisering.

- **"Platstjänster"**: Aktivera och hantera lokaliseringstjänster (GPS och nätverk).
- **"Säkerhet"** Hantera säkerhetsinställningar (PIN, låsskärmen, lösenord, ...).
- **"Språk och inmatning"**: Konfigurera skärm och tangentbordsspråk.
- **"Backup & återställning"**: Ta bort personuppgifter och återställa standardinställningarna.
- **"Datum Tid"** Ställa in datum och tid på enheten (tidszon, tidsformat ...)
- **"Arbetstider strömmen av"** Schema automatisk sätt av/på.
- **"Tillgänglighet"**: Konfigurera tillgänglighetsinställningar.
- **"Utvecklaralternativ"** Inställningar som reserverats för mer erfarna användare.
- **"Om telefonen"**: Kontrollera tillståndet/status på din smartphone och installera uppdateringar.


(1) : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

Här är några exempel på konfiguration.

Tillgänglighetsinställningar

SmartVision innehåller alternativ som låter dig anpassa och anpassa din smartphone för att möta dina behov.

Gå till **"Inställningar"**  ikon, och klicka på **"Tillgänglighet"**.

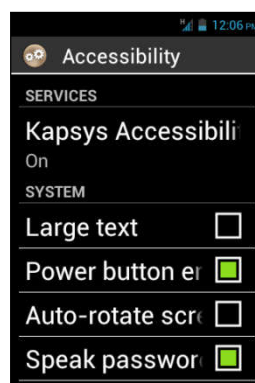

"Kapsys Tillgänglighet" Är tillgängligheten kapacitet som utvecklats av KAPSYS. För att komma åt de olika alternativen, välj **"Tillgänglighet"** och tryck sedan på **"Meny"**  knappen och klicka på **"Inställningar"**.

Inställningarna är som följer:

- **"Skärmläsare"**: Aktiverar eller avaktiverar text-till-tal-funktionalitet.
- **"Eko vid inmatning"**: Bestämmer om text-till-tal-funktionen ska meddela ditt val av tecken, med ord eller hela meningen.
- **"Meddelanden"** Gör det möjligt för text-till-tal anmälningar och varningar när de tas emot i panelen anmälan (mottagning av ett SMS, till exempel).
- **"TTS hastighet"** Justerar text-till-tal hastighet.
- **"TTS-röst"** Väljer en manlig eller kvinnlig röst.

- **"Taligenkänning"** Aktiverar eller inaktiverar röstläge via röststyrningsknappen på enheten till höger.
- **"Nummerpresentation varning"** Meddelar namn eller telefonnummer i samband med ett inkommande samtal.
- **"Voicemail varning"** Tillkännager ett inkommande meddelande till din röstbrevlåda
- **"Stopp vid skaka"** Stoppar text-till-tal-läge genom att skaka telefonen
- **"Stopp vid närhet"** Stoppar text-till-tal-läge om smartphone är stängd för örat.
- **"Tala när låst"** Gör det möjligt för text-till-tal när enheten är i skärmen avstängt läge.

De andra tillgänglighetstypiska alternativ:

- **"Stor text"** Ökar teckenstorlek Den här inställningen finns också i avsnittet om Display..
- **"Strömbrytaren avslutar samtal"** Avslutar det pågående samtalet via avknappen.
- **"Roter skärmen automatiskt"** Växlar snabbt mellan stående/liggande beroende på skärmpositionen. Vi rekommenderar att du lämnar det här alternativet inaktivt..
- **"Tala lösenord"** Gör det möjligt att ange lösenordet med hjälp av text-till-tal Av sekretesskäl, måste du använda hörlurarna för att ange ditt lösenord i text-till-tal-läge.
- **"Upptäck genom beröring"** Aktiverar skärmläsning samt specifik gest kommandon för användare med nedsatt syn.
- **"Tryck och håll fördröjning"** Justerar multi-tap upptäckt hastighet på pekskärmen.
- **"Installera webbskript"** Tillåter skript som ska installeras på din webbläsare för att förbättra din tillgänglighet.
- **"Kompatibilitet med hörapparater (HAC)"** Ökar ljudnivån för användare med nedsatt hörsel.
- **"Inaktivera Android tangenter"** Inaktiverar Android knapparna som t.ex **"Meny"**, **"Hemskärm"** och **"Tillbaka"**. I sådana fall ska du göra gestkommandon på pekskärmen. Den här inställningen är endast tillgänglig när **"Upptäck genom beröring"** är aktiverad
- **"Bakgrundsfärg"**: Låter dig välja färg på bakgrunden i menyer och listor Observera att denna operation inte är omedelbar och kräver en fullständig uppgradering av systemet.
- **«Spela ett pip efter validering av ett tecken»**Ger dig möjlighet att spela en ljudsignal efter validering av ett tecken i ett inmatningsfält.
- **«Gör en vibration efter valideringen av ett tecken»**Ger dig möjlighet att göra en vibration efter valideringen av ett tecken i ett inmatningsfält.
- **«Validering timeout»**Ger dig möjlighet att ställa in timeout för validering av ett tecken (1,2,3,4 eller 5 sekunder)


Vänligen notera: aktivera eller inaktivera **"Upptäck genom beröring"**-funktionen finns även med direkt tillgång via ett långt tryck på **"På Av"**  knappen.

Ansluta till Wi-Fi

1. På startskärmen, klicka på "**Inställningar**"  ikon, och på "**Wifi**".




2. Tryck på ON/OFF  switch på skärmen längst upp till höger för att aktivera Wi-Fi-anslutning.

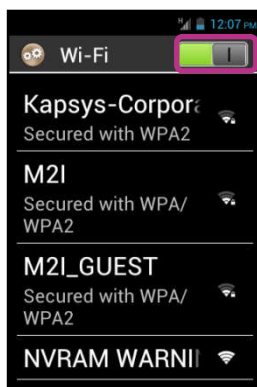

Listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.

3. Välj det nätverk du vill ansluta till.

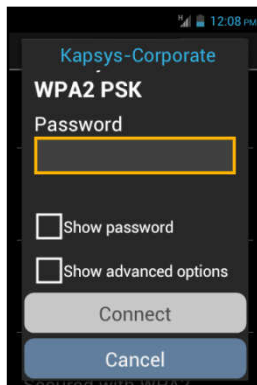


4. Om du vill ansluta till ett säkert Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord.
5. Klicka på "**Anslut**". Det visas en ikon i statusfältet indikerar att enheten är ansluten till Wi-Fi  nätverk.


Vänligen notera: lösenord och säkerhetstangenter (WEP/WPA2) tillhandahålls av tjänsteleverantören. Se dessa uppgifter för att ställa in anslutningen och komma ihåg lösenordet kan vara stora och små bokstäver.

Justera ringsignal


1. På startskärmen, klicka på "**Inställningar**"  ikon, sedan på "**Ljudprofiler**".
2. Välj "**Allmänt**".

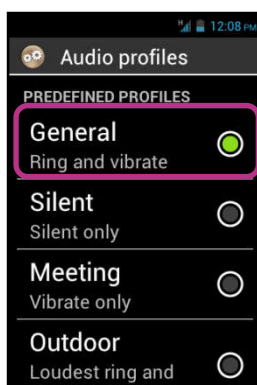

3. Välj "**Ringsignal för röstsamtal**".

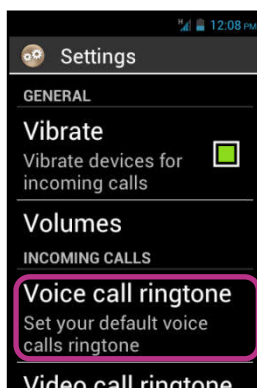

4. Välj för att lyssna på en ringsignal.

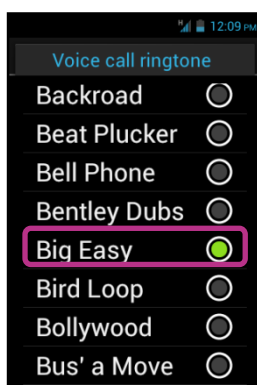


5. När ditt val görs genom att trycka på "**Meny**"  knappen och klicka sedan på "**Tillämpa**". För att spara ändringen.

Vänligen notera: För att justera volymen på din Smart**Vision** använd upp och ner volymknapparna på vänster sida av telefonen. Volymkontrollen kommer att gälla för ljudkällan som för närvarande är i bruk.

Flygplansläge

Flygplansläge avaktiverar alla källor till radiofrekvens på enheten (Wi-Fi, Bluetooth, mobilnätet, etc.).

För att aktivera "**Flygplansläge**", Tryck och håll "**På Av**"  tangent.

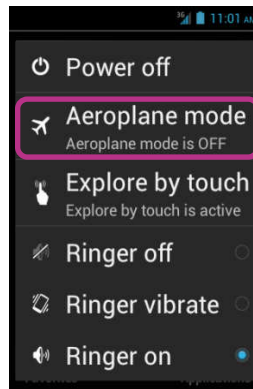


"**Huvudmeny**" Visas. Välj "**Flygplansläge**". Du kommer att få ett meddelande om att det här läget aktiveras av  piktogram i statusfältet.

Vänligen notera: flygplansläge kan också aktiveras från "**Inställningar**"  applikation, genom att välja "**Mer ...**"Alternativet, sedan "**Flygplansläge**".

Uppdatering av Smartvision

Uppdateringar för din smartphone kommer att meddelas på startskärmen med den röda bubblan över "**Inställningar**"  ikon.

För att aktivera uppdateringen, klicka på "**Inställningar**" .

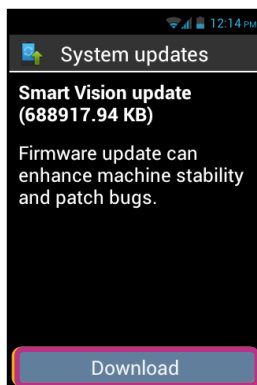

Välj "**Hämta**".

Nedladdningen startar automatiskt och kommer att pågå i cirka 30 till 40 minuter, beroende på din nätverksbandbredd. Därefter kommer enheten att starta om automatiskt tills "Startskärm" visas och meddelas.

Notera:

- Du måste ha dataanslutning, Wi-Fi eller 3G aktiverat för att hämta programuppdateringen. På grund av storlek av den här uppdateringen (1 GB), rekommenderar vi att använda Wi-Fi-anslutning för nedladdning.
- Använd inte Smartvision när nedladdningen pågår.
- Om enheten går i viloläge under hämtningen, gör ett kort tryck på ON/OFF knappen för att väcka upp enheten och sedan när nedladdningen är klar, kommer uppgraderingsprocessen starta automatiskt.

Vänligen notera: Smart**Vision** söker efter uppdateringar regelbundet, du kommer omedelbart informeras när en uppdatering finns tillgänglig. Men du kan också söka efter tillgängliga uppdateringar manuellt genom att välja "**Om telefonen**" "Alternativet, och "**Systemuppdateringar**" från "**Inställningar**"  applikation.


Kontakter

"**Kontakter**"  applikationen fungerar som en telefonbok där alla dina kontakter finns. Det här programmet har placerats som standard i "**Favoriter**" listan ger dig en direkt tillgång till "**Kontakter**"-listan.


Hur man skapar en kontakt

Du vill lägga till en ny kontakt.

1. På startskärmen, klicka på "**Favoriter**"  ikon, sedan på "**Kontakter**" .

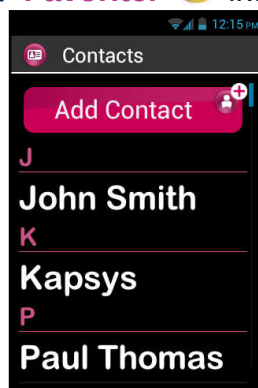

2. Välj "**Lägg till kontakt**", en "**Ny kontakt**" Spela in och visas.

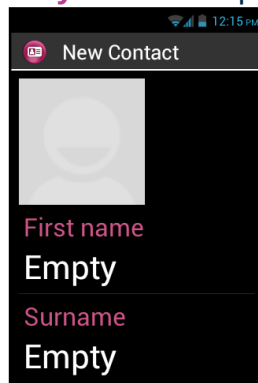

3. Fyll i detaljerna för kontakten klicka på de berörda områdena (foto, efternamn, namn, telefonnummer, e-post, adress).
4. När alla fält är ifyllda, spara kontakt genom att trycka på "**OK**" Längst ner, på posten eller tryck på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Spara**".


Kontakten är nu sparad i alfabetisk ordning bland dina andra kontakter.

Om du vill tilldela en bild till kontakten, klicka på det grå området på toppen av skärmen. Smart**Vision** föreslår att du antingen tar en bild nu eller väljer en från Galleri  ikon.


Vänligen notera: fler fält kan läggas till genom att trycka på "**Meny**"  knappen och klicka på "**Lägg till Fält**".

Redigera en kontakt


1. Bläddra i listan tills du når kontakten som ska redigeras, markera denna kontakt.

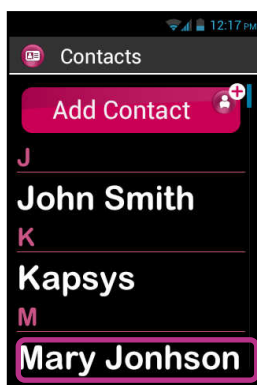


2. Kontaktens post visas.

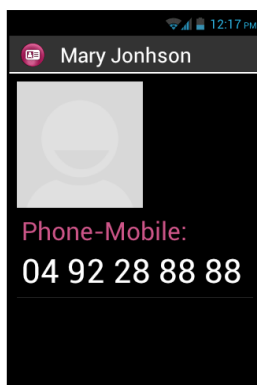

3. Tryck på "Meny"  knappen och klicka på "Redigera".

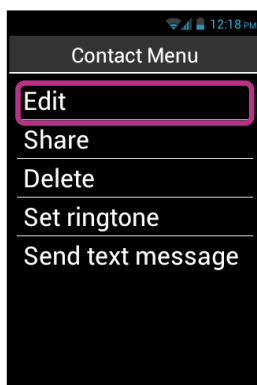

4. Kontaktposten visas i redigeringsläge så att du kan ändra, lägga till eller ta bort fält.

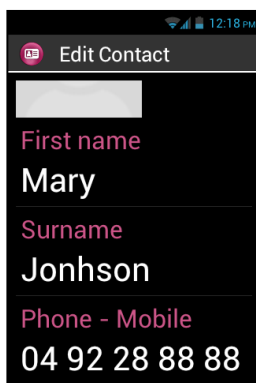


5. Spara dina ändringar genom att klicka på **"OK"** Längst ned i listan, eller tryck på **"Meny"**  knappen och klicka på **"Spara"**.

Vänligen notera: Om du vill tilldela en specifik ringsignal till en kontakt öppnar du kontakten, och få tillgång till den aktuella menyn trycka på **"Meny"**  knappen och klicka sedan på **"Sätt ringsignal"**.


Favorit Kontakt

"Favorit"  Kontakt är en mycket bekväm funktion hos din SmartVision. Det gör att du kan välja bland alla dina kontakter de du vill komma i kontakt med mycket lätt. **"Favorit"** Kontakt fungerar som en mini katalog som du enkelt kan komma åt från **"Telefon"** och **"Meddelanden"** applikationer.


För att skapa en **"Favorit"** kontakt, gå till kontakten. Välj ett telefonnummer, tryck och håll **"OK"**-tangenter. En snabbmeny visas, klicka på **"Välj som favorit"**.

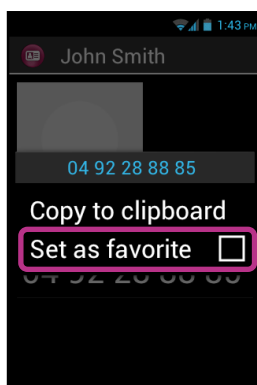

Det valda numret visas med en stjärna.

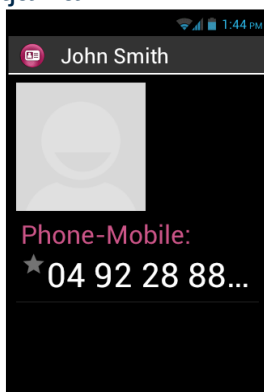

I exemplet nedan är Pierre Durand nu tillgänglig i "**Favorit**" Kontaktlista inom "**Telefon**" och "**Meddelanden**" applikationer.

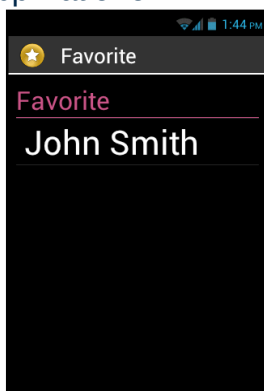

Vänligen notera: "**Favorit**" Kontakt  Listan gäller kontakter, skiljer det sig från "**Favoriter**"  applikation som är reserverad för utvalda Applikationer.

Hitta en kontakt

Om du snabbt vill komma åt en av de Kontakter som sparats på din Smart**Vision**, Kan du använda sökfunktionen:

- Från "**Kontakter**" Applikation, klicka på "**Meny**"
- I listan med alternativ klickar du på "**Sök**". Är en söktjänst inmatningsruta visas i det översta fältet.
- Ange de första tecknen i kontaktnamnet du vill söka med hjälp av fysiska eller virtuella tangentbordet.
- Smart**Vision** visar alla kontakter som matchar sökkriterierna.


Vänligen notera: Du kan även aktivera sökläget direkt från "**Kontakter**" listan genom att trycka på valfri tangent på tangentbordet.

Vänligen notera: Du kan snabbt nå ett objekt i listan med kontakter med hjälp av knapparna 2 till 9 på knappsatsen. Till exempel att trycka på "**6**"  knappen för att välja den första kontakten som börjar med bokstaven "M". Tryck två gånger "**6**"  knappen för att välja den första kontakten som börjar med bokstaven "N". Stjärna "*****" och nummertecken "**#**" knapparna för att snabbt komma i början och slutet av listan.


Importera, Exportera kontakter

För att undvika problem med format för kontakter lagrade på SIM-kortet visas inte SIM-kontakter som standard i SmartVision. Om du vill visa, redigera och använda kontakter från SIM-kortet, är det nödvändigt att importera dem tidigare i det interna minnet av SmartVision.


1. Om du vill importera kontakter från SIM-kortet till internminnet på telefonen, starta programmet «**Kontakter**» .

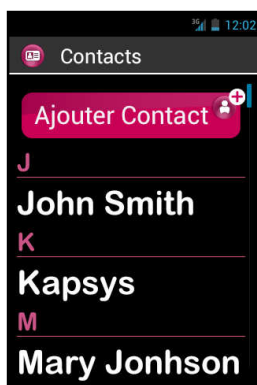


2. Tryck «**Meny**»  tangent sedan «**Import Export**».

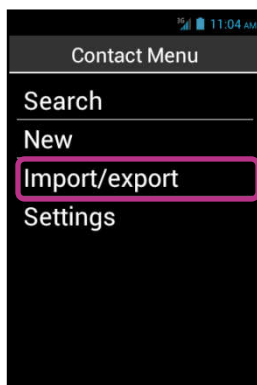


3. Välj kopieringskälla, ditt SIM-kort.

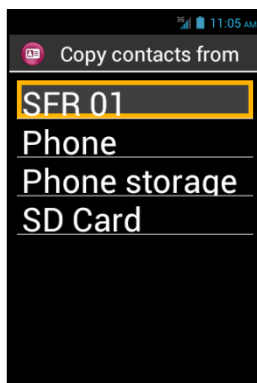

4. Välj sedan destination kopian. I detta fall, «**Telefon**».

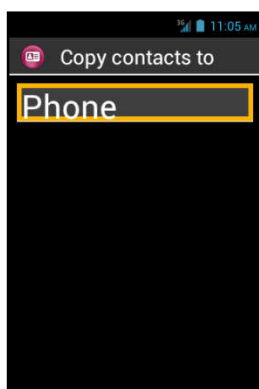

5. Listan över alla kontakter som sparats på SIM-kortet visas.

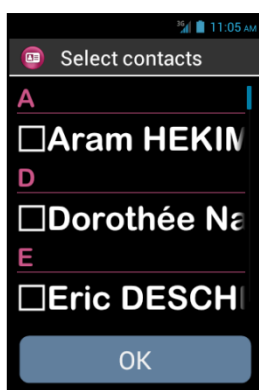

6. Markera de kontakter som du vill spara i telefonens interna minne och slutför importen genom att välja "OK".

Vänligen notera: Du kan också välja alla kontakter från SIM-kortet via "**Meny**"  tangent, sedan "**Välj Alla**".

Ta bort en kontakt

Från kontaktlistan väljer den kontakt du vill ta bort. När profilen öppnas, klicka och "**Meny**"  och välj "**Radera**". Bekräfta raderingen av denna kontakt med "**OK**". Kontakten kommer då att tas bort från telefonens minne.

Vänligen notera: Du kan också ta bort alla kontakter som sparats i telefonens minne genom att trycka på "**Meny**"  från kontaktlistan och välj "**Radera alla kontakter**".

SOS funktion


För din säkerhet, erbjuder SmartVision en SOS  funktion som kan användas för att göra platsbaserade nödsamtal eller skicka brådskande meddelanden till fördefinierade kontakter (10 maximum).

Varning: KAPSYS ska inte hållas ansvarig för skador, vare sig direkt eller indirekt, i händelse av att SOS-funktionen inte fungerar på grund av ett tekniskt problem med enheten eller telefonnätet blir indisponibla.

Aktivera SOS-funktion

Denna applikation används för att programmera "automatisk" skicka en varning som ett telefonsamtal eller ett meddelande eller båda, till en eller flera kontakter som du väljer.

SOS aktiveras genom att aktivera den orange knappen på baksidan av telefonen.

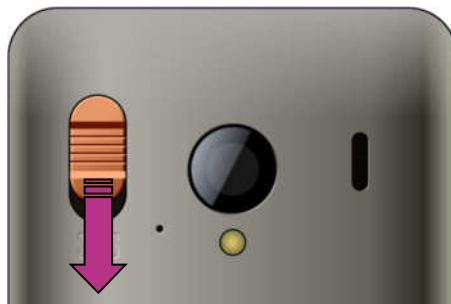

Tryck och skjut knappen nedåt som visas.


Vänligen notera: SOS-funktionen är inaktiverad som standard. Det måste aktiveras innan användning. Om den inte är korrekt aktiverad, kommer du att meddelas via ett meddelande i statusfältet.

Vänligen notera: Ett varningsfönster visas när SOS-knappen aktiveras och när SOS processen pågår.


Ställ in SOS applikation

Innan du använder SOS-funktionen måste du konfigurera programmet enligt följande:

1. På startskärmen, klicka på "**Favoriter**" , Sedan på "**SOS**"  Ikon.

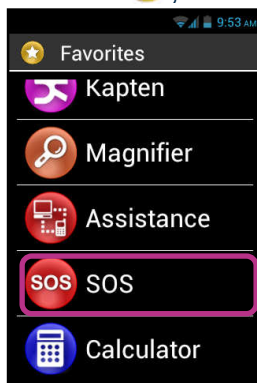

2. Läs varningen och "**Acceptera**" för att fortsätta.
3. SOS funktionskonfiguration visas.

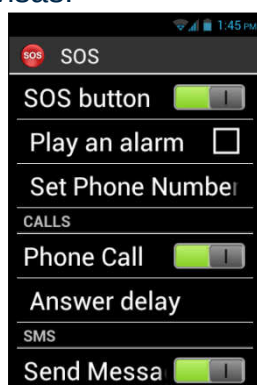

SOS applikation konfigurationsalternativ:

- "**SOS-knapp**", Aktiverar eller avaktiverar SOS-knapp på baksidan av mobiltelefonen.
- "**Spela ett alarm**", Aktiverar uppspelning av en hög varningssignal.
- "**Ange telefonnummer**" Ställer nödnummer som du vill ringa eller skicka ett SMS i en nödsituation.
- "**Telefonsamtal**" Aktiverar telefonsamtal till larmnummer. Samtal görs en efter en, i den ordning som anges i "**Ange telefonnummer**" alternativt tills ett samtal besvaras.
- "**Svar fördröjning**" Ändrar den maximala väntetiden för ett samtal besvaras innan vi går vidare till nästa kontakt på telefonnummer vid nödsituationer listan (30 sekunder som standard).
- "**Skicka Meddelande**" Program att skicka SMS till dina nödnummer.
- "**Skicka Läge**", Rapporterar din geografiska plats i meddelandet, om informationen är tillgänglig när nödsamtalet sänds.
- "**Meddelandetext**", Anpassar innehållet i meddelandet som ska skickas till dina nödnummer.

Kapten (1)

⁽¹⁾ : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

Introduktion

Kapten  Applikation är i första hand ett navigationssystem utformad för personer med synnedsättning. Det bygger på satellitpositioneringssystemet (GPS) för att göra din resa enklare och förbättra din rörlighet tack vare dess innehållsrika funktioner, såsom geo lokalisering, navigering och karta.

Dessutom kommer Kapten kan du spara dina föredragna intressepunkter för att guida dig där när du vill. Dessa intressepunkter kallas K-etiketter.

Slutligen är Kapten kartdata lagrat på SmartVision Micro-SD-kort, därför kan du använda detta program utan att vara ansluten till ett datanätverk (3G-typ).

Frånsägelse

Programmet Kapten är en navigationshjälp som bygger på SmartVision's positioneringssystem, avsedda för fotgängare, men den kan också användas i en bil.

Under en vägledning, vänligen respektera varningarna som beskrivs här. Oavsett ditt färdmedel, ska navigationsanvisningar från Kapten applikation inte befria dig från respektera trafikregler väg och agera ansvarsfullt.

Din uppmärksamhet bör ägnas främst på din miljö. Var uppmärksam och tillmötesgående under din resa och respektera andra användare, antingen fotgängare, cyklister, motorcyklister eller bilister.


Slutligen, använd sunt förnuft innan du lyder en köranvisning från Kaptenprogrammet. Följ noggrant tecken och geometri trottoarer och gator. Om du inte kan ta den riktning som indikeras av Kapten applikation kommer den automatiskt räkna om din resa från din nya position.

Observera att denna produkt bygger på positioneringssystemet på din smartphone. Noggrann bestämning av din position beror på GPS-signalstyrka, vilket till stor del beror på din miljö, där du är, hur du bär telefonen, och även på digitala kartdata. Som en följd av detta kan vi inte garantera att anvisningarna från navigationssystemet är korrekta.


Starta navigationsfunktion

På startskärmen, klicka på "**Applikationer**" , Sedan på "**Kapten**" .

Kaptenapplikationen är inte i drift förrän GPS-funktionen är aktiverad. Om GPS inte är aktiv kommer du bli ombedd att aktivera det när du startar programmet.

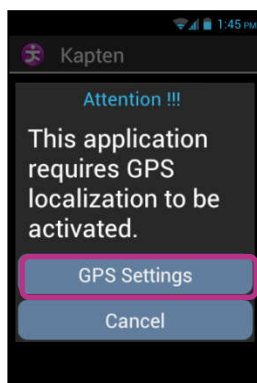

Välj "**GPS-inställningar**"-knappen. Markera "**GPS-satelliter**"-rutan när du når GPS-inställningsmenyn och tryck på "**Tillbaka**"  knappen för att gå tillbaka till Kapten applikation.

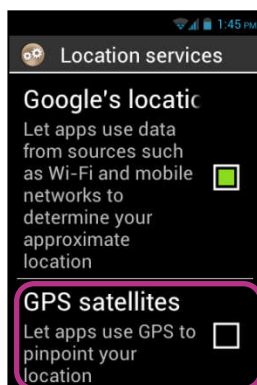


Kapten programmet startas, laddar kartdata, programmetts huvudskärmen visas.

Om du använder det för första gången kommer programmet att begära standard land. Välj önskat land från listan. Du kan ändra standard landet därefter från Kapten programmetts inställningar genom att trycka på "**Meny**"  knappen och sedan klicka på "**Parametrar**", Sedan "**System**" och "**Standard Land**".

Vänligen notera: laddning av programmet kan ta lite tid beroende på storleken på kartan som är installerad på din enhet.

Olika navigationslägen

Välj navigeringsläget du vill använda.

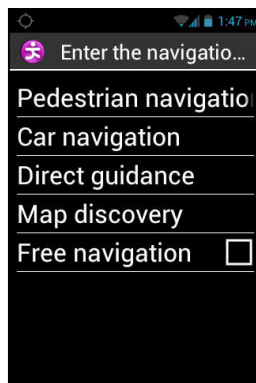

"Fotgångar Navigation": Navigering är anpassad för användning till fots.

"Bilnavigering": Navigering är anpassad för användning i en bil.


"Direkt Guide" Används för att guida dig mot din destination oavsett det faktiska vägnätet, genom att ge dig avstånd och riktningsrelaterad information, med kardinal riktning att ta och hur länge.

"Utforska karta" Används för att läsa kartan och flytta dig från korsning till korsning, samtidigt som den ger dig en beskrivning.

"Fri navigation": Fri navigering ger dig realtid beskrivning av din omgivning.


Välja en destination

Oavsett navigeringsläget du har valt, måste du nu välja en destination bland de föreslagna resmålen nedan:

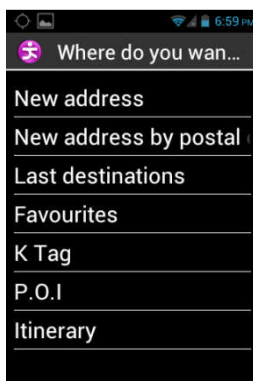

Navigera till en "Ny adress"

Den här inställningen används för att ange en adress som destination.
Det finns två alternativ för att definiera postadress som destination.

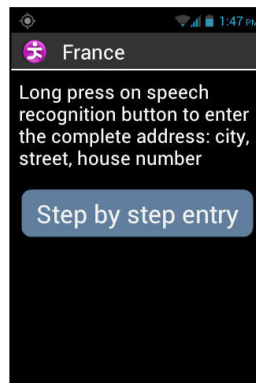

"Standard" ingångsläget: Gör att du kan skriva in denna adress i ett enda steg med hjälp av funktionen röstigenkänning, i följande ordning: Stad/namn stad, gatunamn, och därefter husnummer.

För att aktivera det här läget, från adressinmatning trycker du på och håller röststyrning för att ange adressen och släpp tangenten när det skrivs in.




Kapten kommer sedan föreslå troliga kandidater som matchar din förfrågan, välj en och en vägledning startar för att visa destination.

"Steg för steg" Inmatning: I det här läget, måste du ange olika uppgifter om din destinationsadress i successiva steg, det vill säga staden/ortsnamn, sedan gatunamn och husnummer.

Välj "**Steg för steg inmatning**" ange inmatningsmetod och fortsätt steg för steg.

Vid varje steg, kan du antingen använda tangentbordet eller taligenkänning. Tryck och håll röststyrningsknappen och tala efter ljudsignal. En förteckning över kandidater kommer att föreslås, välj en och gå vidare till nästa steg.

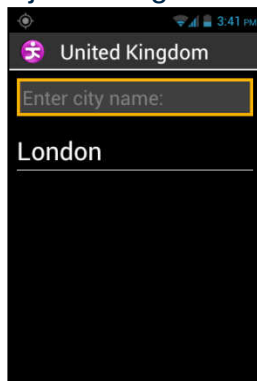

När du har angett olika områden för destinationsadress, kommer resan beräknas och vägledning startar omedelbart.

Navigera till "**Ny adress med postnummer**"

Välj destinationsstaden och anger dess postnummer, gatunamn och nummer, i tur och ordning.

Navigera till "**Senaste resmål**"

Välj din destinationsadress från "**Senaste resmål**"-listan.

Du kan ta bort listan över dina "tidigare resor". Se i "**Parametrar**" för att rensa listan över senaste resor.

Navigera till "**Favorit**"

Välj ditt resmål från listan över din favorit K-Tag.

Navigera till "**K-TAG**"

Välj kategori då K-Tag du vill navigera till.

För mer information om K-taggar och hur man lägga till och hantera dem, se "**K-taggar**" Kapitel.

Navigera till "**Intressepunkt**"

Det här alternativet låter dig välja en användbar adress eller efter intresse (POI):

- per kategori i närheten av min nuvarande position.
- efter kategori nära till nya adress.
- med namn i närheten till en specifik adress.

Förbered din "**Resväg**"


Välj en startadress och en destinationsadress, kommer Kapten beräkna den bästa vägen för den valda navigeringsmetoden. Den beräknade rutten kommer att beskrivas som en kartbok. Navigera med hjälp av upp- och nedpilarna ingår i vägen boken och lyssna på navigeringsinstruktioner för resan.

Under navigering

Vägledninginstruktioner visas och meddelade under hela resan.

Från toppen till botten av skärmen hittar du:

- Namnet på gatan du befinner dig i (rosa zon).
- Avståndet till nästa manöver (svart område).
- Symbolen för nästa manöver (svart område).
- Namnet på nästa gata (blå zon).

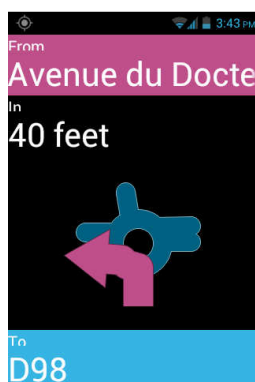

För att spela upp olika vägledningsmeddelanden kan du:

- I avancerat tillgänglighetsläge när skärmläsare aktiveras genom att föra fingret från höger till vänster, sedan från vänster till höger utan att ta bort det från skärmen, för att läsa hela innehållet på skärmen.
- I standardläget, när skärmläsare är inaktiverad, använd upp och ner för att läsa de olika detaljerna på skärmen.
- I läget röstigenkänning, kan du använda sökord i Kapten applikation "**Senaste Instruktion**". Listan över sökord är tillgänglig via "**Meny**" knappen.

Vänligen notera: om fri navigering är aktiverad under en vägledning session kommer instruktioner för fri navigering lämnas vid sidan av de vanliga navigeringsinstruktionerna.

Under navigering, är tangenterna till det fysiska tangentbordet även i samband med specifika sökord. Gör ett kort tryck på en av dessa knappar för att få en information om resan:

- Tangent "1": Var är jag?
- Tangent "2": Senast instruktion
- Tangent "3": Nästa instruktion
- Tangent "4": Aktuell hastighet
- Tangent "5": Hastighetsgräns
- Tangent "6": Återstående avstånd
- Tangent "7": Besöksmål
- Tangent "8": Aktivera/avaktivera fri navigering
- Tangent "9": GPS-signal.

Direkt styrningsmod

"Direkt vägledning" Läget ger dig realtidsinformation om avstånd och riktning till din destination. Sådan information beräknas som det kortaste avståndet mellan de två punkterna och tar inte hänsyn till eventuella vägnätet.

Denna navigationsläget är speciellt användbar för att nå en målpunkt i eller off road.

Observera att information ges endast bekvämlighet och tar inte hänsyn till topografin och eventuella faror du kan komma över, såsom floder, broar, hinder eller liknande hinder. Kapsys frånsäger allt ansvar för skador antingen direkta eller indirekta till följd av användning av det här läget.

Följande information finns i **"Direkt vägledning"**Läge:

- Kardinal orientering från din ankomstpunkt till din nuvarande position, det vill säga norr, nordöst, öster, sydöst, söder, sydväst, väster och nordväst.
- Avstånd från din nuvarande position till din punkt ankomst i meter eller kilometer.
- Riktning du behöver ta för att komma till din destination. Denna information uttryckt i timmar med hjälp av klockan positionsformat, från 1 till 12 timmar, enligt din senast kända riktning.

När **"Direkt vägledning"** Läget är aktiverat, meddelas avstånd väderstreck och kursinformation vid regelbundna tidsintervall.

Observera att Kapten applikation noggrant kommer att beräkna din riktning om du flyttar. Om du är stillastående, ger Kapten dig tidigare och rätt riktning. Programmet kommer dessutom att skicka meddelandet "Ingen riktningsinformation" när den inte kan ge någon tillförlitlig information om riktning att följa.

Exempel på **"Direkt vägledning"** Meddelanden:" destination, nordväst på 250 meter, sväng höger: din destination är 250 meter i en nordväst riktning, du måste svänga till höger.


"Direkt vägledning" stannar inte automatiskt när du når din slutdestination, du måste trycka på **"Tillbaka"**  knappen för att stoppa det.

Vänligen notera: Inställningen **"Direkt vägledning"** (se inställningar) kan användas för att definiera hur ofta automatisk upprepning av meddelanden eller att aktivera eller inaktivera **"Direkt vägledning"**-läge i slutet av navigering.

Fri navigering

I fri navigeringsläget finns realtidsinformation om din miljö. När det här läget är aktiverat, tillkännager Kapten gatan du befinner dig på och beskriver nästa korsning till dig. När du närmar dig en korsning, beskriver Kapten det genom att ge dig namnen på gatorna i korsningen. Efter att ha lämnat korsningen, meddelar Kapten nästa gata du är på väg till.

Som standard är fri navigeringsläget aktiverat automatiskt varje gång du startar en vägledning. Men det här läget kan aktiveras eller inaktiveras som du vill genom att trycka på "**Meny**"  knappen från Kapten applikationsskärmen.

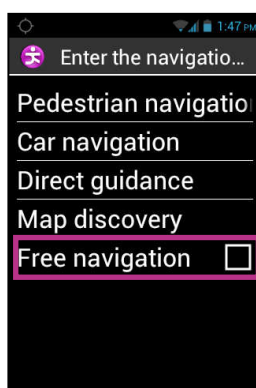

Så snart "**Fri navigering**" är aktiverat eller inaktiveras, skickar Kapten ett budskap om bekräftelse på att det här läget är aktiv eller inaktiv.

Du kan ställa in "**Fri navigering**" Läge, till exempel:

- Konfigurera meddelande av närliggande K-taggar och adresser.
- Upprepa meddelanden som "Fri navigering" -läge automatiskt.

Se Kapten applikation "**Inställningar**" För mer information.

K-TAG

Kapten applikationen integrerar geo-taggningsfunktioner, så kallade K-Tag, vilket gör att du kan spara en plats i samband med relevant information.

Du kan använda K-taggar som waypoints. Dessutom kan du ha i närheten K-etiketter meddelade till dig medan du är i fri navigeringsläge.

En K-Tag är en geografisk markör som inkluderar:

- En geografisk plats eller en adress
- En röstmemo för att identifiera K-Tag
- En kategori
- En "favorit" attribut (används för direkt åtkomst) som navigeringsdestination.

"K-TAG" Meny

Från Kapten programmet genom att trycka på "**Meny**"  knappen och klicka på "**K-Tagg**". Följande alternativ finns:


- "**Skapa K-Tagg**".
- "**Ändra K-Tagg**".
- "**Radera K-Tagg**".



Skapa en K-Tagg


Så här skapar du en K-Tag, välj ett av alternativen nedan:

- "**Nuvarande Position**" Skapa en ny K-Tag med hjälp av din aktuella position.
- "**Ny adress**" Skapa en ny K-Tag genom att ange en adress.
- "**Koordinater**" Skapa en ny K-Tag genom att ange latitud och longitud.

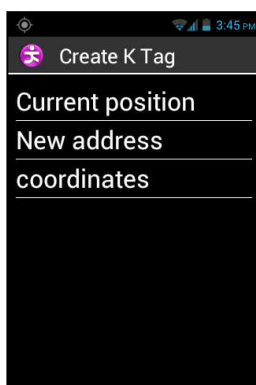


1. När du har definierat en geografisk position för K-Tag, kan du tilldela ett röstmemo för att hitta den lättare. Välj alternativet "**Ange röstmemo för din KTAG**", Tala sedan efter tonen.


Om du inte vill tilldela ett röstmemo väljer du "**Fortsätt**", I detta fall, den närmaste postadress kommer att användas som K-Tag identifiering.

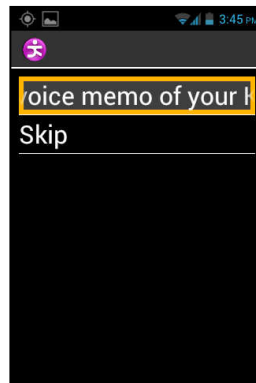

2. Välj den kategori som du vill tilldela denna K-Tag till: "**Kontakt**", "**Hotell och restaurang**", "**Transportfordon**", Etc ...

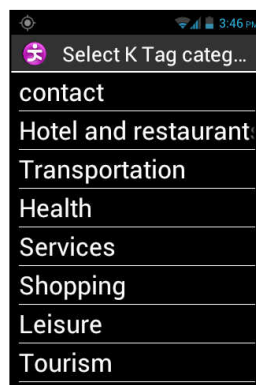


3. Slutligen föreslår Kapten att du definierar din K-Tag som en "**Favorit**".

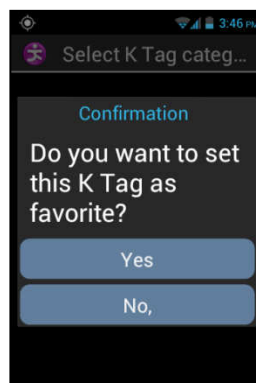

Modifiera en K-Tagg

Från "**K-Tagg**" skärmen, klicka på "**Ändra K-Tagg**", Och välja kategori samt K-Tag som ska redigeras.

När K-Tag är valt, kan du ändra "**Kategori**", "**Röstmemo**" eller "**Favorit**" attributet.

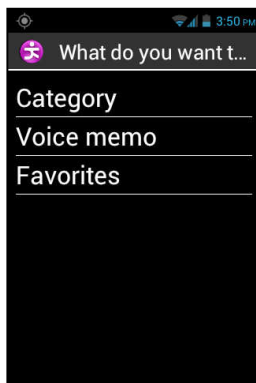

Välj ett alternativ och göra de nödvändiga ändringarna genom att följa stegen nedan:

Ta bort en K-Tag

Från "**K-Tagg**" skärmen, klicka på "**Radera K-Tagg**", Och välja kategori och K-Tag tas bort.

Röstkommando tangentord

Kapten applikationen omfattar röstkommandon tangentord som är permanent i drift när programmet är aktivt.

Tangentord:

Följande generella sökord är alltid aktiva, även när navigationsfunktionen är avstängd.

Aktivera fri navigering
Stoppa fri navigering
K-Tagg
Hastighetsbegränsning

Var är jag?
Parametrar
Nuvarande position

GPS Signal
POI runt

Aktuell hastighet

Aktiverar fri navigeringsläge.
Inaktiverar fri navigeringsläge.
Aktiverar Tag menyn K.
Ger hastighetsgräns appliceras på vägen du befinner dig på.
Ger din nuvarande position.
Aktiverar inställningsmenyn.
Ger latitud och longitud i grader, minuter och sekunder, höjdinformation i meter.
Ger GPS-signalstyrka.
Indikerar intressepunkter i alla kategorier runt din nuvarande position.
Ger din aktuella hastighet.

"Navigation" specifika sökord

Följande sökord är fungerar bara om navigationsläget är aktivt.

Stoppa navigering	Stoppar aktuell vägledning.
Kartbok	Aktiverar kartbok under navigering.
Kvarvarande avstånd	Ger resterande avstånd till destinationen.
Senaste Instruktion	Upprepar tidigare köranvisning.
Aktuell destination	Ger den aktuella destinationen.
Ankomst tid	Ger ankomsttid.
Aktuell Navigation	Ger navigeringsläge som används för tillfället.
Växla till Fotgängarläge	Växlar till fotgängarnavigering läge utan att ange igen adressen för destinationen.
Växla till Bil-läge	Växlar till bilnavigering utan att ange destinationsadressen igen.
Nästa instruktion	Ger nästa köranvisning.

Inställningar

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar Kaptenprogrammet. Tryck på **"Meny"**  knappen för att komma åt alternativen, välj **"Parametrar"**-menyn.

Inställningarna grupperade efter kategorier:

- **"System"**: Kan du ange systeminställningarna.
- **"Fotgängarnavigering"**: Kan du ange fotgängare navigeringsinställningar.
- **"Bilnavigering"**: Kan du ange bilnavigering inställningar.
- **"Fri navigering"**: Låter dig ange de fria navigeringsinställningarna.
- **"Direkt Vägledning"**: Kan du ange inställningarna direkt vägledning.
- **"Detaljer och uppdatera"** Hämtar information om programvaru- och kartuppdateringar.

Vänligen notera: Du kan även komma åt inställningarna i Kapten applikationen genom att skicka röstkommandot **"Parametrar"** från det här programmet.

"System" Inställningar är:

- **"Standard Land"** Anger standard landet inställd för adress" standard "ingångsläget.
- **"Måttenh"**: Anger avstånd och hastighet enheter som används i navigationsanvisningar (metriska och brittiska).
- **Radera senaste resmål"**: Rensar valda från listan över tidigare resor adresser.
- **"Återställa standardinställningar"** Återställer fabriksinställningarna i Kapten.
- **"Återställ produkt"**: Återställer alla inställningar och raderar alla personliga data som sparats i Kaptenprogrammet (tidigare resor, K-taggar).

"Fotgängarnavigering" inställningar:

- **"Automatisk instruktionsupprepning"** Definierar tidsintervallet för att upprepa navigations (Ingen, 1, 3, 5 eller 10 minuter).
- **"Timindikation"** Aktiverar eller inaktiverar timindikationen i instruktionerna för manövrer.

"Bilnavigator" inställningar:

- **"Dirigeringsparameter"**: Anger de kriterier som används för ruttberäkning (snabbaste, kortaste).
- **"Aktivera motorvägar"**: Anger ruttberäkning med eller utan motorvägar.
- **"Tillåt vägtullar"**: Anger ruttberäkning med eller utan avgiftsbelagda vägar.
- **"Automatisk instruktion upprepning"**: Anger tidsintervall för navigeringsmeddelanden uppspelning (Inga, 1, 3, 5 eller 10 minuter).

"Fri navigering" inställningar:

- **"P.O.I meddelanden"** Väljer och skärmar i sevärdhetskategori som ska meddelas när du kommer nära.
- **"K-Tag meddelanden"** Väljer och skärmar olika K-Tag kategorier som tillkännagavs när du kommer nära.
- **"Typ av meddelande"** Definierar POI eller K-Tag meddelandeläge när man är i närheten (Ingen anmälan, ljud varning eller röstmeddelande).
- **"Kardinal riktningsinformation"** Aktiverar eller inaktiverar de kardinal riktning tillkännagivanden av den aktuella vägen.
- **"Automatisk instruktion upprepning"** Anger tidsintervallet för navigering till fots meddelande uppspelning (Inga, 1, 3, 5 eller 10 minuter).

"Direkt vägledning" inställningar:


- **"Automatisk instruktion upprepning"** Anger tidsintervallet mellan direkta vägledningsanvisningar (Ingen, 1, 3, 5 eller 10 minuter).
- **"Direkt vägledning när destination har nåtts"**: Möjliggör eller avbryter automatisk övergång till direkt vägledning i slutet av en fotgängare eller bil vägledning.

Hjälp

Denna funktion gör att du kan få stöd från en tredje part via en privat och säker VPN baserad server, som kommer att få tillfällig tillgång till din smartphone och hjälpa dig att sätta upp din SmartVision.

Begär hjälp

På startskärmen, klicka på "**Favoriter**" , Sedan på "**Hjälp**" .

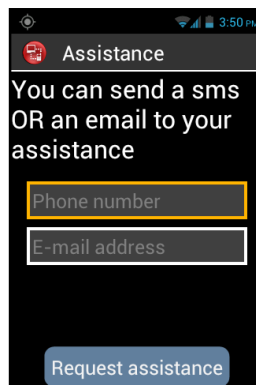

Ange tredje partens telefonnummer för att skicka honom/henne en SMS eller e-postadress.

Klicka på "**Begär hjälp**" att skicka ett biståndsbegäran som innehåller handenhetens anslutningsinformation.

Fjärråtkomst till SmartVision

När meddelandet har skickats, kan förbindelse upprättas med stödpersonen. Efter att ha mottagit meddelandet kommer stödperson ladda ner en fjärrkontroll programvara (VNC typ) till en dator för att kunna komma in detaljerna (server-postadress och lösenord) fått i SMS eller e-post.

Vänligen notera: för att ta reda på mer om VNC-kompatibla program, besök vår hemsida www.kapsys.com, Under Support och SmartVision av KAPSYS.

Stödpersonen tar kontroll över din smartphone via datorns tangentbord och mus:

"F1"  tangent tilldelas till SmartVision "Meny"  knappen.

"F2"  tangent tilldelas till SmartVision "Hemskärm"  knappen.

"F3"  tangent tilldelas till SmartVision "Tillbaka"  knappen.


   används för att navigera genom skärmarna och menyerna på din SmartVision.

Vänster musknapp  används för att välja ett alternativ på SmartVision" skärm.


Klicka på "Avsluta hjälp" Alternativ på din smartphone för att stoppa delningssessionen när som helst.

Stödpersonen kan också avsluta sessionen genom att trycka på "F11"  tangent på hans/hennes dator.

Kalender

"**Kalender**"  applikation öppnar en kalender som visar dina händelser sorterade efter datum.

Tryck på "**Meny**"  knappen för att komma åt de olika alternativen för "**Kalender**"-menyn:

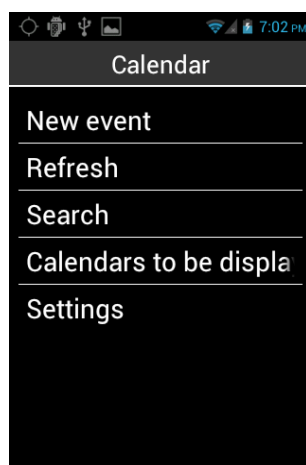

- "**Ny händelse**" Scheman en tid genom att fylla i alla fält (händelsetitel, plats, datum, etc.).
- "**Uppdatera**" Uppdaterar dagordningen.
- "**Sök**" Söker en redan planerad händelse.
- "**Kalendrar som ska visas**" Synkroniserar kalendern med en annan i en dator till exempel.
- "**Inställningar**" Ger tillgång till allmänna inställningar och låter dig anpassa händelserna, display, påminnelser, meddelanden, etc, baserat på dina inställningar.

Väckarklocka

Välj "**Klocka**" , och tryck på knappen "**Meny**"  knappen för att öppna menyn. Klicka på "**Lägg till larm**" för att ställa in ett larm, datum, tid och ringläge du vill. För att inaktivera, ändra eller ta bort larmet, klicka på objektet och trycker på "**OK**" knappen för att öppna snabbmenyn.

Kamera

Välj "**Kamera**" , och tryck på knappen "**Meny**"  knappen för att komma åt inställningarna.

Justera kamerainställningarna en i taget. När du är klar, tryck på **"OK"** för att ta en bild. Du hör slutarljudet när bilden tas.

Tagna bilder sparas i telefonens minne i mappen "DCIM". De är också synliga från "Galleri" applikationen.

Kalkylator

Med **"Kalkylator"**  programmet kan du utföra grundläggande operationer såsom addition, subtraktion, multiplikation och division. För mer komplexa operationer dvs sinus, cosinus, logaritm, etc. beräkning trycker du på **"Meny"**  knappen för att öppna menyn och klicka på **"Avancerad panelen"**. Här har du också ett alternativ för att ta bort tidigare beräkningar.

Galleri

Galleri-funktionen fungerar som ett fotoalbum där foton och videoklipp som fångats med din Smart**Vision** lagras. Välj **"Galleri"**  applikationen. Innehåll i albumet organiseras i två kategorier: alla bilder  och alla videoklipp . Välj ett album för att visa dess innehåll.

Tryck på **"Meny"**  knappen för att komma åt de olika alternativen för albumet:

- **"Fånga bild"** Kan du använda kameran funktionen för att ta en bild.
- **"Fånga video"** Låter dig använda videokamerafunktion för att ta en video.
- **"Bildspel"** Kan du visa dina bilder som ett bildspel.
- **"Flervals"** Kan du välja flera objekt i galleriet som ska delas eller tas bort.
- **"Inställningar"** Låter dig hantera Galleri Alternativ: bildstorlek, sorteringsordning och bekräftelse av radering för foton och videor.

Video Player

"Video Player"  program används för att visa filmer lagrade i telefonens interna minne eller en micro SD-kort på din Smart**Vision**. Micro SD är ett löstagbart minneskort som används för lagring av information och utökar den totala kapaciteten på din smartphones lagring.

Förstoring

SmartVision inkluderar ett digitalt förstoringsglas för en förbättrad användarupplevelse. Med det digitala förstoringsglaset kan du förstora text eller hela dokument och anpassar dig till din synskärpa med hjälp av de olika inställningar som är tillgängliga för zoom och färgkontraster.

Den digitala förstoringen nås genom att välja "Favoriter" , Klicka på "Förstoring"  från startskärmen.

Passa in din SmartVision ovanför texten som ska förstoras, flytta upp eller ned för att ställa in skärpan och använder sifferknapparna "2" och "3" för att zooma in och ut.

Ytterligare alternativ är:

- Knapp 1: ökar eller minskar ljusstyrkan.
- Tangent * (stjärna): fryser skärmen.
- Knapp 0: tar en bild och sparar den till galleriet.
- Tangent # (Fyrkant): väljer från 9 färgkontrastnivåer tillgängliga.

Du kan också få tillgång till de här alternativen genom att trycka på "Meny"  knappen.

Vänligen notera: För bästa resultat, krävs riktiga ljusförhållanden.

Färgdetektering


Med "Färgdetektering" , kan du använda telefonens kamera för att upptäcka färger.

- «Annonsera färger»: rikta kameran på ett objekt, och färgen kommer att meddelas automatiskt. Tryck på "OK" knappen för att upprepa.
- «Hitta färg»: välj en färg från listan och när kameran kommer att se den här färgen, spelas ett ljud upp.


Vänligen notera: Det rekommenderas att du placerar telefonen ca tjugo centimeter från målet och i en ljus miljö för att optimera resultatet.

Ljudinspelningar

"**Ljudinspelaren**"  programmet används för att spela in röstmemon. Välj "**Spela**" för att börja spela in memo, klicka på "**Paus**" för uppehåll och på "**Stanna**" för att avsluta inspelningen.

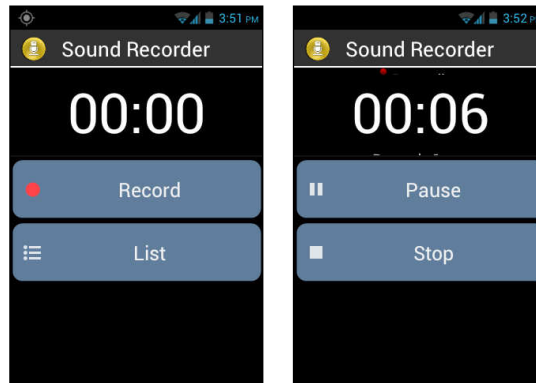

Du kan lyssna på ett inspelat memo genom att välja "**Spela**" alternativet. Du kan också "**Kassera**" eller "**Spara**" det.

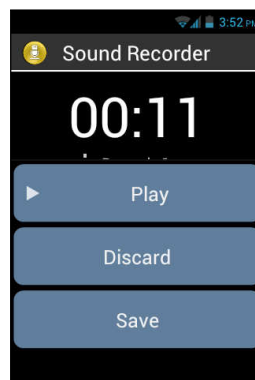


Slutligen, kan du spela upp något av de röstmemon som registrerats, från startskärmen när du klickar på "**Lista**" alternativet. Du kan också redigera ett röstmemo i listan genom att trycka länge det objekt du vill ändra. Välj sedan från fönstret "**Byt namn på posten**" eller "**Radera post**".


Musik

"Musik" 🎵 Programmet ger dig möjlighet att spela upp musik eller röstmemon som har sparats på telefonens minne eller micro SD-kort.

När musikprogrammet startas, kan du välja låtar sorterade efter album, artister, låtar eller spellistor.

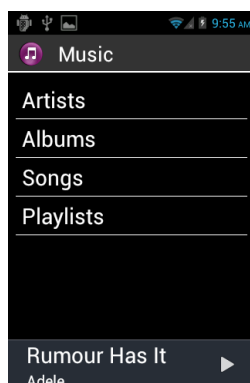

Medan du lyssnar använda upp och ner pil för att gå till föregående spår, nästa spår, spela upp och pausa åtgärder.

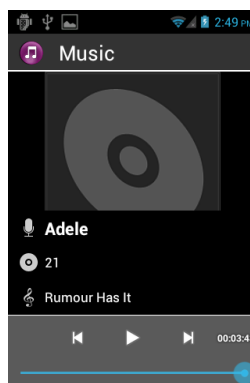

Använd knapparna 1 och 2 för att gå vidare i spåret 10 respektive 30 sekunder. Använd knapparna 3 och stjärna "★" för att flytta bakåt i spåret 10 respektive 30 sekunder.


Webbläsare

"Webbläsare" 🌐 program används för att ansluta till Internet. Tryck på **"Meny"** ☰ knappen för att komma åt inställningarna internet. Genom "sök" från menyn kan du starta en enkel sökning med hjälp av standardwebbläsare.

Vänligen notera: Du kan också söka på webben med hjälp av **"Sök"** applikationen. Webbida laddning indikeras med en ljudsignal.

Notera

"**Notera**" Programmet används för att skriva och spara texter, påminnelser eller inköpslista till exempel.

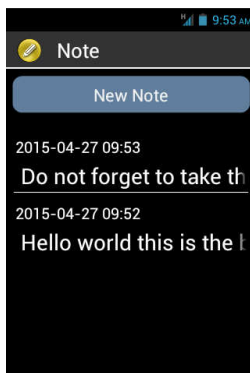

För att skapa en anteckning, från huvudskärmen för att välja "**Ny anteckning**", Använd sedan knappsatsen eller röstigenkänningsläget att mata in text. När du är klar väljer du "Bekräfta" för att spara anteckningen.

När du väl skapat alla anteckningar sorteras den efter datum.

För att läsa anteckning behöver du bara välja den från huvudskärmen genom att använda upp och ner pil. Tryck sedan på "OK" om du vill öppna läsläge och sedan navigera i anteckningen genom att använda följande genvägar:

- Kort tryck på knappen «**OK**»: Spela/paus.
- Kort tryck på knappen "**1**": Läs vänster tecken.
- Kort tryck på knappen "**2**": Läs höger tecken.
- Kort tryck på knappen "**4**": Läs vänster ord.
- Kort tryck på knappen "**5**": Läs höger ord.
- Kort tryck på knappen "**7**" Börja om från början
- Kort tryck på knappen "**8**" Flytta till slutet


Knapp 1, 2, 3, 4, 5 pausar automatiskt läsningen, tryck på "OK" för att fortsätta.

NFC (1)

⁽¹⁾ : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

Med NFC (Near Field Communication) teknik kan smartphones och andra enheter att kommunicera med NFC-taggar.

SmartVision erbjuder den här funktionen, därför kan du ställa in och läsa dina NFC-taggar.

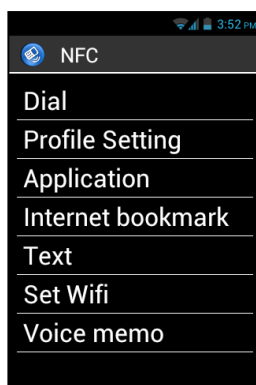

De olika alternativ som finns i det här programmet låter dig tilldela antingen information eller en åtgärd till en NFC-tagga som sedan kan utföras automatiskt när du läser TAG. Dessa alternativ är:

- **"Ringa"** tilldelar ett telefonnummer till en kontakt och ringer det numret.
- **"Profil Inställning"** delar ett telefonläge (Wi-Fi, Bluetooth, flygplansläge, ringsignal) och gör det möjligt.
- **"Applikation"** Tilldelar ett program som kan startas automatiskt.
- **"Internet bokmärke"** delar en länk till en webbsida, och laddar webbsidan i webbläsaren.
- **"Text"** Tilldelar en text och läser den med taligenkänning.
- **"Ställ WiFi"** delar Wi-Fi-inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) och loggar automatiskt.
- **"Röstmemo"** delar ett röstmemo och spelar den.

Om du vill skriva eller läsa en NFC-tagga, ta baksidan av din smartphone nära taggen, ett pip kommer att meddela dig att taggen har registrerats.

OCR (1)

⁽¹⁾ : Ej tillgänglig på SmartVision Lite.

OCR-funktionen skannar en text med hjälp av optisk teckenigenkänning, och läser, med hjälp av text-till-tal-funktionen.


Konverteringen beror på textinspelningskvaliteten. OCR-programmet är utrustad med intelligenta dokument erkännande och automatisk datafångst system som har förmågan att korrekt konvertera ett A4-dokument med text i teckenstorlek 12 eller högre. För att säkerställa automatisk detektering, måste dokumentet placeras framför dig i vertikal position på en klar, en färgad, väl upplysta, med förankring som starkt kontrasterar med det dokument som ska skannas.

Två infångningslägen är tillgängliga:

1. "**Siddetektion**" Inspelningsfunktionen är speciellt användbar för blinda. Användaren är röstguidad hela processen av att dokumentet upptäcks och fångas automatiskt.
2. "**Kamera**" Läget gör det möjligt att fånga textdokument utan röstguidning.

Välj "**Applikationer**"  från hemskärmen och klicka på "**OCR**" .

Från OCR-menyn, välj källan:

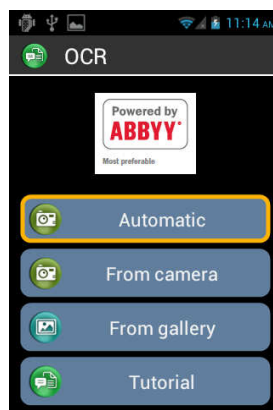

"**Från Automatiskt läge**" Placera din SmartVision på texten genom att trycka på "**OK**" Knappen. Håll luren horisontellt och för den sakta uppåt när du följer ljud instruktionerna tills din SmartVision automatiskt fångar texten. Optisk igenkänning startar omedelbart. I det här läget har du ett ljudstöd för att hålla horisontellt. Mer signaler är långt från varandra, nära dig är från det horisontella.

"**Från Kameraläge**". Rama in och fokusera textdokument själv Starta skanningen av dokumentet genom att trycka på "**OK**"-knappen. OCR-processen startas automatiskt.

"Från galleriet" Välj ett dokument som lagrats i fotogalleriet på din SmartVision. Teckenigenkänning startar omedelbart.

"Handledning": Du kan lära och upptäcka processen genom att använda OCR.

Du kan trycka på **"Meny"**  knappen för att komma inställningarna OCR meny:

- OCR språk: välj din språkidentifiering
- Ljudeffekt: aktivera signal för att hjälpa dig att hålla horizontality.

Om funktionen för automatisk detektering misslyckas, rekommenderar vi att du går tillbaka till menysidan OCR och starta proceduren igen från början.

Läsning av OCR resultat förenklas med hjälp av genvägar läs:

- Kort tryck på knappen **«OK»**: Spela/paus.
- Kort tryck på knappen **"1"**: Läs vänster tecken.
- Kort tryck på knappen **"2"**: Läs höger tecken.
- Kort tryck på knappen **"4"**: Läs vänster ord.
- Kort tryck på knappen **"5"**: Läs höger ord.
- Kort tryck på knappen **"7"** Börja om från början
- Kort tryck på knappen **"8"** Flytta till slutet

Play Store

Play Store är en onlinebutik som skapats av Google. Det gör att du kan ladda ner program från tredje part på din Smartvision. För att komma åt Play Store måste du ha en Gmail-e-postadress. Vid första starten av Play Store, kommer ett inloggningsfönster föreslås. Välj **"Existerande konto"** och följ installationsproceduren för att komma åt nedladdning plattform.

FM-radio

Med SmartVision kan du lyssna på din favoritradiostation. Använd de olika knapparna för att skanna olika frekvenser.

Om du vill spara en station, tryck och håll en av de (fysiskt) knappsatsen siffrangenterna (0 till 9). Tryck kort på knappen tilldelas den station som ska spelas. Tryck **"Meny"**  för att komma åt användningsmöjligheter.

Vänligen notera: FM-radion fungerar bara när hörlurarna är anslutna till telefonen eftersom de fungerar som en antenn.

Sök

Använd detta program för att hitta något på din Smart**Vision** (Applikation, kontakt, e-postadress, musik, ...). Denna applikation är mycket användbar för att göra sökningar på internet.

Nedladdningar

"**Nedladdningar**" applikationen innehåller en förteckning över alla objekt som laddats ner från internet webbläsare.

Rättsligt meddelande och garanti

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER

- Hantera din KAPSYS enhet och tillbehör med största omsorg, tappa den inte eller slå inte på den
- Enheten är utrustad med en pekskärm, använd bara fingrarna
- Plocka inte isär produkten eftersom detta kommer att leda till att garantin ogiltigförklaras och kan orsaka skador som kan göra produkten obrukbar
- Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inte kemikalier, rengöringsmedel eller slipprodukter, vilket kan skada enheten
- Gnugga inte produkten med ett vasst verktyg, som kan skada den
- Denna produkt är inte vattentät. Skydda den mot fukt och stänk av vätska. Om enheten är våt eller har utsatts för fukt, ta ut batteriet och låt den torka.
- Använd aldrig enheten nära en värmekälla och undvik att lagra enheten i en varm, fuktig eller frätande plats.
- Använd inte produkten i områden med mycket höga eller låga temperaturer.
- Använd inte produkten nära magnetfält.
- Använd inte enheten om skärmen är trasig eller sprucken, eftersom det kan orsaka skada.
- Använd inte produkten i områden med explosionsrisk
- Använd inte produkten på sjukvårdsinrättningar och be om tillstånd innan du använder telefonen i närheten av medicinsk utrustning.
- Produkten innehåller ett inbyggt litium-polymer-batteri. För att öka batteriets livslängd, ladda alltid ut den helt och tar inte ut produkten i temperaturer under 0 °C (32 °F) eller över 45 °C (113 °F)
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer. Drifttemperatur: -10 °C (14 °F) till + 55 °C (131 °F). Korttidslagringstemperatur: -20 °C (-4 °F) till + 60 °C (140 °F). Långsiktig lagringstemperatur: -10 °C (-4 °F) till + 25 °C (77 °F)
- Långvarig användning av produkten kan leda till att produkten blir varm, men det är normalt.
- För optimal prestanda av din enhet, rekommenderar vi att du stänger av den då och då och ta bort batteriet.
-

2. SÄKERHET OCH HÄLSA

- Håll produkten borta från små barn som små delar i produkten eller produktens tillbehör kan orsaka kvävning
- Håll händerna fria när du kör: köra din bil på ett säkert och ansvarsfullt sätt och följ trafikreglerna.
- Skydda din hörsel: undvika långvarig exponering för höga ljudnivåer när du använder hörlurar, högtalare eller mottagaren.
- Om du bär en pacemaker eller bor i närheten av en person som bär en, kan du söka råd med din läkare eller tillverkaren av pacemakern för eventuella frågor du kan ha när det gäller användningen av trådlösa enheten.
- Radio radiosändare kan störa säker och effektiv användning av viss medicinsk utrustning som inte kan skyddas på lämpligt sätt.

3. GARANTI - ANSVARSBEGRÄNSNING

BORGESMAN

Borgensmannen är Kapsys, tillverkaren av anordningen, med säte på 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Mougins Sophia Antipolis (06250), Frankrike.

BEGRÄNSAD GARANTI

Kapsys garanterar köparen att produkten överensstämmer med beskrivningen av dessa (som visas på www.kapsys.com hemsida) i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.211-1 ff. i den franska konsumentlagen.

Kapsys garanterar den ursprungliga köparen att produkten, från inköpsdatum, är fri från defekter i utförande och material när den används under normala förhållanden och i enlighet med dess avsedda ändamål.

Denna produkt är garanterad under en period av två (2) år och batteriet är garanterad under en period på sex (6) månader från inköpsdatum.

Under denna kommersiella garantiperiod kommer produkten antingen att repareras av Kapsys och/eller någon Kapsys-godkänd serviceleverantör, gratis eller ersättas, som Kapsys anser det lämpligt, kostnadsfritt.

Garantin gäller KAPSYS telefon i Europa där garantin är registrerad.

Kontakta din leverantör för frågor om garantiservice. Användare som ansöker om täckning kommer att uppmanas att ge ett bevis på inköp av sin produkt (adress och inköpsdatum).

I enlighet med artikel L 211,16 i den franska konsumentlagen, är garantiperioden av en produkt reparerad under garantin där produkten är tillgänglig för användning eller kan inte användas för mer än sju dagar (7) automatiskt förlängas med den tid som reparationen.

Kapsys garantin täcker inte:

- Tillbehör som medföljer produkten;
- Normalt slitage av produkten och minskning av batteriets laddningshållande kapacitet;
- Skador till följd av felaktig användning, exponering för fukt eller vätska eller närhet till en värmekälla;
- Spruckna eller trasiga enheter eller enheter med synliga tecken på stötar;
- Underlåtenhet att respektera försiktighetsmått, olyckor, försumlighet, missbruk eller använda oförenligt med de instruktioner som medföljer enheten eller kommersiell användning av produkten;
- Kortslutning av batteriet eller användning av batteriet i en annan enhet än din enhet;
- Användning av tillbehör eller kontakter som inte rekommenderas av KAPSYS;
- Skador till följd av försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av KAPSYS.

Den begränsade garantin ingår härmed och i enlighet med tillämplig lagstiftning utesluter någon annan underförstådd garanti och/eller skyldighet åligger säljaren, i synnerhet, men inte begränsat till någon skyldighet när det gäller tillfredsställande kvalitet, tillförlitlighet eller tillgänglighet av noggrannheten eller fullständiga svar, resultat och information som lämnats av produkten eller datatillgänglighet.

Du rekommenderas att göra en eller flera säkerhetskopior av dina data som lagras i din produkt. KAPSYS kan inte hållas ansvarig för förlust av data som orsakats av produkten fel, reparation eller utbyte.

4. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter kan KAPSYS hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag, vare sig direkt eller indirekt, allmänna eller särskilda, som du eller någon tredje part kan drabbas som orsakas av eller är relaterade till användningen av denna bruksanvisning eller de produkter eller tjänster som den beskriver eller oförmåga att använda produkten eller någon av produktens funktioner.

Nätverksservrar och eller cellulära systemtjänster tillhandahålls av tredje parter via kommunikationssystem, nätverk och media som KAPSYS inte har någon kontroll och kan därför inte garantera tillgång till och effektiv drift av densamma. Vi rekommenderar att du kontaktar direkt berörda leverantörer för något stöd i samband med deras tjänster.

5. OM Specifik energiabsorption

Din Smartvision från KAPSYS är en radiosändare/mottagare. Den har konstruerats och tillverkats för att uppfylla de radiofrekventa (RF) exponeringströsklar som rekommenderas av Europeiska unionen. Standardexponering för mobiltelefoner bestäms av en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate eller "SAR".

Den högsta nivån enligt ICNIRP: s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,297 W/kg över 10 gram kroppsvävnad.

SAR-gränsen sätts av ICNIRP till 2 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över 10 gram kroppsvävnad.

Tester används för att bestämma SAR-nivåer utfördes på grundval av ett standardiserat användningssätt med telefoner sänder sin högsta effektnivå över hela området av frekvensband. Den faktiska SAR-nivån för en enhet i drift kan vara lägre än det maximala värdet eftersom enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft nivå som krävs för att komma åt nätverket. Detta värde varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är från en nätbasstation.

Användningen av tillbehör kan påverka SAR-värden. SAR gränser kan variera beroende på teststandarder och information redovisningskrav i ansökan i olika länder och i enlighet med nätverkets bandbredd.

6. KUNDSERVICE

För mer information, kontakta din leverantör kundtjänst eller skicka ett mail till: Service klienter KAPSYS - 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS Sophia Antipolis, Frankrike.

Du kan också besöka vår hemsida: www.kapsys.com.

7. VARUMÄRKEN

Företag och produktvarumärken som avses i detta dokument och i handböckerna är varumärken, antingen registrerade eller inte, som ägs av respektive innehavare.

Kapsys ord, märken och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Kapsys SAS.

Ord, varumärken och logotyper som Android, Clavier Google, Lecteur Google, Play Store, Google Play Musik Paramètres Google är registrerade varumärken som tillhör Google Inc. i USA och/eller andra länder.

ABBYY namn, varumärken och logotyper är registrerade varumärken som tillhör ABBYY Software Ltd.

Bluetooth namn, varumärken och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG Inc.

Nuance är ett registrerat varumärke som tillhör Nuance Corporation Inc.

Alla varumärken och produktnamn är handelsnamn eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Om det här dokumentet

Informationen som publicerats i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kapsys förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta dokument utan skyldighet att meddela någon person eller enhet som helst därav. Kapsys kan inte hållas ansvarig i händelse av eventuella tekniska eller publicering fel eller utelämnanden i detta dokument, eller i händelse av oavsiktlig eller indirekt förlust eller skada till följd av produkt drift eller från att använda det här dokumentet.

Kapsys strävar efter att ständigt förbättra vår produkt och dess funktioner "kvalitet och prestanda. Kapsys uppmanar därför dig att besöka deras hemsida (www.kapsys.com) för den senaste uppdateringen om användning och drift av denna produkt.

Denna produkt uppfyller CE-märkningskraven för användning i bostäder, kommersiella eller lätt industri installationer.

Långvarig exponering för musik på hög volym kan orsaka hörselskador.

Felsökning

Innan du kontaktar Kundservice, läs nedanstående rekommendationer:

- För optimal prestanda av din enhet, rekommenderar vi att du stänger av den då och då.
- Det rekommenderas att ladda (🔋)batteriet för förbättrad drift.

Och utföra följande kontroller:

Min mobiltelefon startar inte/Jag får en svart skärm:

- Tryck "På Av" 🔌 tangent tills skärmen tänds.
- Kontrollera batteriets laddningsnivå.
- Kontrollera batterikontakterna, ta bort och installera om batteriet, sätt sedan på telefonen igen.

Min skärm är svårt att läsa:

- Rengör din skärm.
- Justera skärmens ljusstyrka till miljöljusförhållanden (Snabb inställning från panelen Notering).

Min mobiltelefon stängs av sig själv:

- Tryck "På Av" 🔌 knappen för att sätta på den igen.
- Kontrollera batteriets laddningsnivå.

Min mobiltelefon stänger av sig efter en kort stund:

- Se till att du utför full laddning (minst 4 timmar).
- För att öka batteriets livslängd, kan du stänga av Wi-Fi, Bluetooth och GPS-funktioner om du inte behöver dem (snabb inställning från panelen Notering).

Min mobiltelefon laddar inte på rätt sätt:

- Se till att batteriet inte är helt urladdat.
- Se till laddningen utförs under normala förhållanden (0 °C + 40 °C)
- Kontrollera att batteriet är insatt. Det måste införas innan du ansluter laddaren.
- Se till att du använder batteri och laddare som tillhandahålls av KAPSYS.
- När du är utomlands, kontrollera att den elektriska strömmen är kompatibel.

Min mobiltelefon ansluter inte till ett nätverk:

- Försök att ansluta från en annan plats.
- Kontrollera nättäckning med din teleleverantör.
- Kontrollera att flygplansläge är avaktiverat.
- Kontrollera med din teleoperatör att SIM-kortet är giltigt.
- Försök att ansluta vid ett senare tillfälle om nätverket är överbelastad.
- Ta bort och installera SIM-kortet.

Röstgränssnittet fungerar inte:

- Om du befinner dig i tal-till-text-läge, kontrollera din dataanslutning (Wi-Fi, 3G).
- Felaktig användning av sökord eller röstkommando (se sidan 24).

SIM-kortfel/Ingen telefonfunktion kan nås:

- Kontrollera om SIM-kortet har satts i ordentligt.
- Kontrollera om chipet på SIM-kortet inte är skadat eller repat.

Det går inte att ringa utgående samtal:

- Se till att du har ringt ett giltigt nummer och tryckt på "**OK**" tangent.
- För utlandssamtal, kontrollera lands- och riktnummer.
- Se till att din mobiltelefon är ansluten till ett nätverk, och att nätverket inte överbelastas eller saknas.
- Om du är utomlands, kontrollera med din teleleverantör stödjer internationella samtalsalternativ.
- Kontrollera att flygplansläge är avaktiverat.

Det går inte att ta emot inkommande samtal:

- Se till att din mobiltelefon är påslagen och ansluten till ett nätverk (kontrollera om överbelastad eller saknas nätverk).
- Kontrollera att flygplansläge är avaktiverat.

Samtalskvaliteten är dålig:

- Du kan justera volymen under ett samtal med hjälp av volym upp och ner Tangent på vänster sida.
- Kontrollera nätverkets signalstyrka med indikatorn i statusfältet .

När jag väljer ett nummer från min kontaktlista, slås inte numret:

- Kontrollera att numret är korrekt sparad.
- Se till att du har valt landsnumret när du ringer från utlandet.

Mina korrespondenter kan inte lämna ett meddelande på min telefonsvarare:

- Kontrollera med din teleleverantör om den här tjänsten finns tillgänglig.

Jag kan inte komma åt min röstbrevlåda:

- Kontrollera om du korrekt har angett din teleleverantör för röstbrevlådan (Klicka på "**Telefon**", "**Meny**", "**Inställningar**", och "**Röstbrevlåda**").
- Försök senare om nätverket är upptaget.

SIM-kort låst

- Du har angett tre felaktiga PIN-koder, kontakta din telefons tjänsteleverantörer för att få PUK-koden.

Tekniska Specifikationer

- **Operativ System:** Android 4.0
- **Utförande:**
Storlek: 130 x 60 X13 mm
Vikt: 140g
Pekskärm: Kapacitiv multitouch, IPS QVGA, 3.5" med automatisk bakgrundsbelysning hantering
- **Hårdvara:**
Sim-kort format: Standard (2FF)
Kontaktdon: Micro USB OTG 2.0, jack ljud 3.5mm
Cellulär konnektivitet:
 - o HSUPA/HSDPA (3G +)
 - o UMTS (3G)
 - o GSM 850/900/1800/1900**Trådlös anslutning:**
 - o Bluetooth 3.0
 - o WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2,5 GHz/5 GHz
 - o NFC (inte tillgänglig på Smartvision Lite)**Energiförbrukning:**
 - o Batteri: 2000 mAh Li-ion
 - o Standby-tid (viloläge): 220h
 - o Taltid: 10h**Processortyp:** Cortex A9 @ 1 GHz
Internminne : 4Go
Externt minne : MicroSD-kortplats - upp till 64 GB
GPS-mottagare : Ja, med A-GPS-stöd
Andra sensorer : accelerometer, gyro, digital kompass
SAR: 0297 W/kg
- **Kamera:**
Upplösning: 5 megapixlar
Video: HD 720p @ 30 fps
Fokus: Manuell och autofokus
Digital zoom: 4x
Flash: LED